

E-DRIVE TIL KØRESTOLE



 **E-DRIVE**

Tilbehør til kørestolsstellene
Guppy, Seabass, Galileo & Mika



Oplev hvordan E-drive forenkler din hverdag

E-drive er motoriserede hjul til kørestole.

E-drive monteres nemt på disse kørestolsstel Guppy, Seabass, Mika og Galileo for at gøre kørsel lettere.

E-drive er udstyret med navmotorer med den nyeste teknologi. Her kan du vælge at bruge motoren eller selv rulle. E-drive giver mulighed for individuel tilpasning for brugeren eller den der kører kørestolen.

Styringen sker nemt med et joystick.

Ved hjælp af joysticket eller et computerprogram kan du nemt justere parametre som hastighedsforøgelse, hastighedsreduktion, svingfølsomhed, følsomhed i joysticket eller de tre forskellige kørestile; sport, standard eller blød.

E-drive er lige så velegnet til brug indendørs som udendørs og displayet kan også ses i direkte sollys.



Guppy med E-drive 16" hjul

E-drive fakta

- 2 motordrevne hjul i størrelse 16" eller 20".
- 2 stk. aluminium drivringe til 20" hjul.
- Anti-tip støtte
- Joystick til manøvrering som enkelt programmeres gennem joysticket, alternativt gennem Smart-tune software i computer eller tablet.
- Batteri + batterilader.
- 2 års garanti.



E-drive 16" hjul



E-drive 20" hjul




Seabass med E-drive 16" hjul

TEKNISKE DATA

Motor	24V 120Wx2
Batteritype	Nickelmetallhydrid, 24Vx6,7 Ah (tilvalg Li-ion, 25Vx11,8Ah)
Hjul	7 kg
Totalvægt	16 kg (inkl NiMH batteri), 17,5 kg (inkl Li-ion batteri)
Ønsket stolebredde	ca. 4 cm (total)
Hjuldimensioner	16", 20"
Lufttryk	6 Bar, 600 kPa
Hastighed	0-6 km/t
Max kørestækning ved fuldt opladede batterier	ca 15 km med NiMH, ca 35 km med Li-ion, (ISO 7176-4)
Sikring	30 A (flat)
Max brugervægt	Op til 125 kg
Max brugervægt "heavy duty"	Op til 150 kg
Max bagud formåen	6 grader
Batteriladere	100 - 240V AC, 50/60Hz
Estimeret effekt	37V. 26A (under ladning)
Ladetid	Normal opladning ca. 2-3 timer
CE Mærkning	I henhold til kravene i EU-direktiv 93/42/EEG
Brugerinstruktioner	Se brugervejledning



Batteri

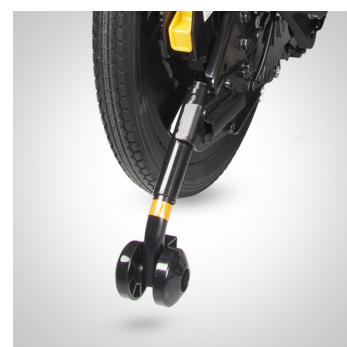

Anti-tip støtte



Joystick på kørehåndtag



Parkeringsbremse er tilbehør

Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S
Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74
Fax 86 17 01 75
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.com
www.facebook.com/AnatomicSITT.dk
youtube.com/anatomicsitt