



GUPPY G2

**Nyhed
størrelse 3
& 3 bred**

Stærk, let og fleksibel

Nye størrelser!

Nye størrelser 3 og 3-bred klarer belastningsvægt op til 105 kg.

Balance

Balance har været en ledetråd gennem hele udviklingen, for at kunne kombinere mange forskellige siddesystemer og formstøbte sæder med Guppy G2. Balancepunktet justeres enkelt ved bagerste hjulaksel.

Mange muligheder

Guppy G2 er udviklet til at passe til de fleste siddesystemer fra forskellige leverandører.

Stor valgmulighed af hjul

Guppy G2 leveres med sorte non-mark dæk (6", 7" og 16"). Vi kan til størrelse 1 og 2 tilbyde cambervinklede hjul for lettere manøvrering.

Det er muligt at tilvælge hjul med E-drive hjælpemotor.

Fodstøtteserie

Ny fodstøtteserie som passer til alle G2 kørestolsstel. Fodstøtten er opbygget på to stænger for at øge stabilitet og funktion. Fodstøtterne tilbydes i flere udformninger for at imødekomme brugerens behov.



Guppy G2 med Delfi siddesystem



Guppy G2 fakta

Størrelser	4 stk.
Belastningsvægt	Max 75 - 105 kg
Tiltvinkel	0 til 31°/-6 til 29°
Hjul	16", 20", 22" og 24"

Totalbredde	51-66 cm*
Totallængde	68-91 cm
Sædehøjde (min)	46 cm
Sædehøjde (max)	50 cm*

*beroende på valg af hjul



Billedet viser

Guppy G2 med 16" drivhjul
og kørebøjle

GUPPY G2

**Quick-justering
af kørehåndtag**

For let og bekvem
brug

Høj kørebøjle

For bedre ergonomi

**Trinløs dybdejustering
af kørebøjlen**

For bekvem brug

Armlæn

Nye lækre armlæn

Spor i toppladen

For enkelt at kunne jus-
tere sædets tyngdepunkt

Plan monteringsplade

Tillader montering
af forskellige typer
sæder/siddesystemer

Quick-release

Let at tage hjulene af

**Mulighed for camber-
vinklede hjul**

Forbedret sidestabilitet
og kørsel

E-drive

Mulighed for hjul med
hjælpe-motor

Non-mark dæk


Efterlader ingen mærker




Eksempel på tilbehør Zitzi Guppy G2




Anti-tip dobbelt

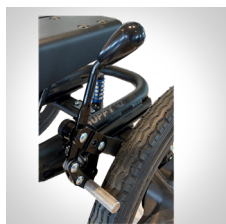

Parkeringsbremse

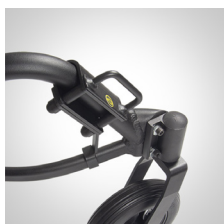

Transportfæste

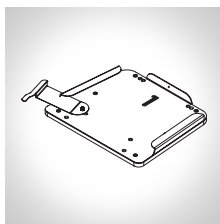


Forstærket
monteringsplade




Adaptersystem
til Delfi Pro



Adaptersystem
Universal

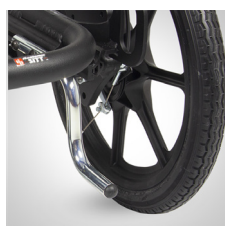

Tippepedal

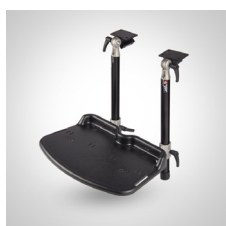

Hel fodstøtte



Delt fodstøtte




Lægstøtte



Armlæn




Stænskærm
16"/20"/22"/24"

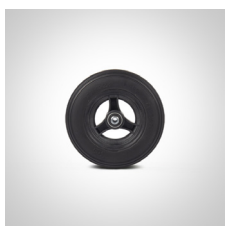

Forskellige svinghjul



Hjul 16"/20"/22"/24"

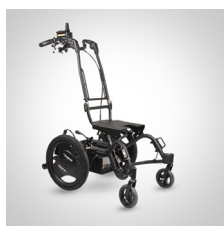

E-drive hjælpemotor

For yderligere information, se vores bestillingsunderlag
og tekniske data på www.anatomic sitt.dk

Passende siddesystem



Delfi Pro



Sharky Pro



Active



Anatomic
formstøbt sæde

Anatomic SITT A/S
Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web www.anatomic sitt.dk

FØLG OS PÅ:

