



Få balance i kroppen

Viden - den deler vi

Vi ønsker, at vores viden og ekspertise skal hjælpe mennesker med funktionshindringer til at få en bedre hverdag og et mere aktivt liv. Og det kræver meget mere end gode produkter.

Vi støtter dig hele vejen

Bag Anatomic SITT står stolte, lidenskabelige mennesker, der brænder for at udvikle hjælpemidler og finde løsninger til mennesker med forskellige funktionsnedsættelser.

At have veluddannet personale med avanceret ekspertise på forskellige områder, ser vi som et must. Vi ved, at viden er, hvad der ofte er forskellen mellem en god og en mindre god løsning.

Sammen er vi bedst

Sammen med dig skaber vi de bedste løsninger og produkter til en lettere hverdag. Sammen stræber vi efter at skabe balance i kroppen.

Indhold

Anatomic formstøbte sæder 4

Anatomic formstøbt sæde 5

Anatomic formstøbt sæde Soft 6

Anatomic formstøbt sæde Soft ALU 7

Anatomic formstøbt sæde Kombi 8

Anatomic formstøbt hygiejnesæde 9

Dynamiske siddesystemer 10

Zitzi Delfi Pro 12

Zitzi Sharky Pro 13

Zitzi Active 14

Anatomic Motion Seat 15

Bad og toiletstole 16

Zitzy Starfish Pro & Starfish Mini 16

Kørestolsstel 19

Buster 20

Mika 21

Galileo 21

Flipper G2 22

Flipper Flex G2 23

Guppy G2 24

Seabass G2 25

Ståhjælpemidler 26

Positioneringsseler og bæltter 28

Hovedstøtter 32

Liggende positionering 33

Øvrige produkter 35

Joggere 36

Siddepuder til kørestole 37

Kontakt 38



Formstøbte sæder

”Optimal understøttelse til opnåelse af funktionel siddestilling”

Anatomic formstøbt sæde er grundstenen i Anatomic SITT. Det kræver stor ekspertise, omhu og præcision at lave formstøbte sæder, der giver den optimale støtte. Med over 30.000 formstøbte sæder er du i kyndige hænder hos os.

Når du bestiller et formstøbt sæde hos os, er 3 måneders opfølgning inkl. i prisen. Gennem viden og innovation ønsker vi at forhindre smerte og fejlstillinger samt muliggøre deltagelse og bevægelse. Gøre det umulige muligt - at give dem med store funktionsnedsættelser mulighed for en øget livskvalitet.

Med et Anatomic formstøbt sæde kan man sætte støtten lige, hvor borgeren har brug for den. Med rette støtte, positionering og aflastning kan vi forhindre og reducere en fortsat udvikling af scolioser, kyfoser og andre fejlstillinger. At ”holde” hofterne, så de ikke sublukserer (delvis ledforskydning) eller lukserer (ledskred).

Med den rette siddestilling kan vi skabe balance, som lindrer smerter og forebygger en forværring af fejlstillinger. Med balancen kommer også bedre lungefunktion og øget blodcirkulation samt kontrol af kroppens bevægelsesmønster, ikke mindst kontrol af hovedet, hvilket skaber forbedrede kommunikations muligheder.

For dem med svære siddeproblematikker er den bedste løsning et individuelt udformet formstøbt sæde. For disse personer er valg af støtte og aflastning afgørende for om sædet kommer til at fungere og et individuelt udformet sæde giver størst mulig individuel støtte.

Med dagens teknologi og nye materialer skaber vi formstøbte sæder, som er meget behagelige at sidde i og nemme at håndtere, med det rette materiale og tilbehør, kan du få et køligt sæde om sommeren og et varmt og komfortabelt sæde i vinterkulden.

Der tilbydes et stort udvalg af tilbehør til vores formstøbte sæder.

”Vi støtter dig hele vejen...”

Hvorfor skal du vælge et formstøbt sæde fra Anatomic SITT?

1. Mange års erfaring
2. Stor faglighed
3. Samarbejde med fysio- eller ergoterapeut
4. Forundersøgelse og problemlokalisering er en vigtig del af processen
5. Specialløsninger ingen hindring
6. Kun fantasien sætter grænser
7. 3 måneders opfølgning med i prisen



+++

- + Mulighed for en komplet løsning med levering af kørestolsstel, formstøbt sæde og tilbehør, alt monteret og klart
- + Vi ser på de samlede behov i personens livssituation
- + Dynamik i sædet
- + Crashtestet og godkendt
- + Nemmere transport
- + Individuelle løsninger til f.eks. nakkestøtter, bælter, fodstøtter, lægstøtte, kiler, bord, armlæn mm.
- + Vipbare kropsstøtter
- + Bredde- og vinkeljusterbare kropsstøtter
- + Integrerede overarmsstøtter
- + Mulighed for at justere sædet lateralt men også frem og tilbage
- + Mulighed for at dele sædet mellem ryg- og sædedel for montering på kørestolsstellet for at kunne anvende dets tilt og vinkelingsfunktioner
- + Inkontinensbetræk
- + Fremstillet i Norden

En god støtte...

- + Modvirker at fejlstillinger opstår eller forværres
- + Forbedre organernes muligheder for funktion
- + Lindrer smerter ved størst mulig trykfordelingsflade
- + Giver energi til andet end at holde balancen



Dynamisk siddesystem

Vore formstøbte sæder er dynamiske. Støbets skal er fremstillet af polyethylenplast som muliggør bevægelse i sædet, med undtagelse af vores Soft ALU støb.

Ønsker man yderligere bevægelsesmulighed i det formstøbte sæde, kan man få monteret et flexled mellem sædedel og rygdæl.



Anatomic formstøbt sæde

Et sæde med optimal støtte, som kan korrigere.

Anatomic formstøbt sæde er til personer med fikserede eller korrigerbare deformiteter, og som har behov for fast støtte for at modvirke yderligere fejlstillinger.

Fordelene er mange:

- + Virkelig god postural støtte
- + Sæde til personer med svære siddeproblematikker
- + Muligt at montere flexled for et mere dynamisk sæde og indstillelig rygvinkel
- + Fast støtte for at holde stillingen
- + Mulighed for at få monteret en ventilator, som giver et svalt sæde om sommeren. Og til personer, som i det hele taget har det varmt.
- + Varmebetræk for et lunt og behageligt sæde om vinteren
- + Mulighed for flere indlæg, hvilket gør at du kan fjerne et indlæg til eksempelvis at give plads til overtøj, når man er udendørs.
- + Vaskbare indlæg/betræk.

Vores
sæder kan
kombineres
med alle
kørestolsstel



Anatomic formstøbt
sæde på et Seabass G2
kørestolsstel

Eksempel på **funktioner** og **tilbehør** til Anatomic formstøbt sæde



RR materiale



Ventilationspakke



Delt sæde- og
rygbetræk



Flere betræk



Inkontinensbetræk



Anatomic formstøbt sæde Soft

Et sæde til dig, som har brug for optimal støtte, blødere komfort og ekstra trykaflastning.

Anatomic formstøbt sæde Soft er til personer som er meget trykfølsomme og som stiller høje krav til trykaflastning og blød komfort.

Fordelene ved Anatomic formstøbt sæde Soft er blandt andet:

- + Høj trykaflastning
- + Vælg mellem forskellige skum- og materiale typer alt efter positionerings og trykaflastningsbehov
- + Bredde- og vinkeljusterbar i overkroppen
- + Gennemgående ventilationshul gør sædet ventileret
- + Coolmax®-betrækket gør sædet køligere



Anatomic formstøbt sæde Soft på et Guppy G2 kørestolsstel



Eksempel på **funktioner** og **tilbehør** til alle vores formstøbte sæder



Individuel
nakkestøtte



Fodkasse



Armbind og
ankelbespænding



Seler og bælter



Kugleledsfodstøtte



Anatomic formstøbt sæde Soft Alu

Sædeskallen er af aluminium med samme skum og gode trykaflastende egenskaber som Anatomic formstøbt sæde Soft

Anatomic formstøbt sæde Soft Alu er et nyt støb, som kombinerer vores Anatomic formstøbt sæde Soft med en aluminiums skal. Ved at udskifte plasticskallen på vores bløde sæder med aluminium, reducerer vi brugen af forskellige plastprodukter betydeligt.

Sædeskallen af aluminium har flere fordele:

- + Mere miljøvenlig. Aluminiumsskallen betyder en betydelig reduktion af plast i både produktionen og det færdige sæde.
- + Aluminium er let og stærkt, hvilket betyder, at vægten af sædesystemet kan holdes nede.
- + Sædeskallens flade overflader gør det lettere at montere forskelligt tilbehør som armlæn, nakkestøtter, hofteseler og seler.
- + Montering og afbalancering af sædet på chassiset er nemmere med en flad bundplade.
- + Nemmere vedligeholdelse. Skumpuderne i sæde og ryg ligger lige mod ALU-skallen, hvilket forenkler betrækkets form og gør det lettere at tage af og på ved vask eller rengøring.



Anatomic formstøbt sæde Soft Alu på kørestolsstellet Flipper G2



Anatomic formstøbt sæde Kombi

Kombinerer det bedste fra to verdener, et Anatomic formstøbt sæde Soft i kombination med et klassisk Anatomic formstøbt sæde.

- + Meget god postural støtte
- + Sæde til personer med svære siddeproblematikker
- + Fungerer også rigtig godt til aktive kørestole
- + Mulighed for flex-led til dynamisk siddestilling og delvist justerbar rygvinkel
- + Fast støtte
- + Mulighed for at have flere indlæg, hvilket gør det lettere at montere tykt overtøj om vinteren

I et Anatomic **formstøbt sæde Kombi** kombinerer vi den bedste støtte fra Anatomic formstøbt sæde med maksimal trykaflastning fra Anatomic formstøbt sæde Soft for endnu bedre individuel tilpasning.

Eksempel på **funktioner** og **tilbehør** till Anatomic formstøbt sæde Kombi



Airseat - pakke



Foldbar kropsstøtte



Kropsstøtte



Formstøbt støtte sæde Soft



hul




Individuel nakkestøtte

Eksempler på andre typer af Anatomic formstøbte sæder



Formstøbt ryg

Bruges når man vil kombinere en formstøbt ryg med en pude.

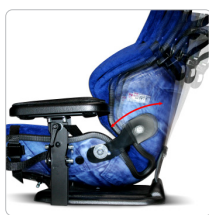

Justerbar rygvinkel

Bruges når man har behov for at ændre hofte- og rygvinkel.



Ventilationspakke

Bruges hvis man har det varmt og har brug for ventilation i sædet.



Ventilationshuller

Bruges hvis en borger generelt har det varmt.



Formstøbt Motion seat

En kombination af Anatomic formstøbt sæde og Motion Seat (se også s. 15).



Anatomic formstøbt Hygiejnesæde

Et individuelt sæde til bad og toilet brug, med alle fordele som et klassisk Anatomic formstøbt sæde. Vandafvisende og behagelig polstring.

Anatomic formstøbt Hygiejnesæde har mange fordele:

- + **Individuel hovedstøtte** - højdejusterbar hovedstøtte med aftagelig polstring
- + **Individuelt udformet formstøbt sæde**
- + **Aftagelig polstring** - nem at udskifte
- + **Sæde** med toiletåbning som tilpasses individuelt
- + **Tilvalg:** Hovedstøtte, armlæn, fodstøtte, hoftebælte, urinskjold mm

FAKTA

Et Anatomic formstøbt sæde kan fremstilles efter samme form som Anatomic formstøbt hygiejnesæde og omvendt.

Bestiller man et Anatomic formstøbt hygiejne sæde inden for to år efter at man har bestilt et almindeligt Anatomic formstøbt sæde, kan man få det til en særlig attraktiv pris. Det skyldes at Anatomic formstøbt hygiejne sæde kan bestilles efter samme scanning som et Anatomic formstøbt sæde.



Eksempel på **tilbehør**



Fodkasse



Hoftebælte



Brystseler



Vores dynamiske siddesystemer


”Få god balance i kroppen”

Vores mål med udviklingen af vores dynamiske siddesystemer var at skabe siddesystemer med mulighed for bevægelse for at bryde extensionsspasticitet. Vi ønskede også at forhindre forekomsten af forskellige fejlstillinger hos borgeren ved at give en god støtte og positionering i siddesystemet tidligst muligt i livet. Endvidere ønskede vi at muliggøre en aktiv siddestilling og et siddesystem, hvor det kunne vokse med barnet. I dag ved vi, at et dynamisk siddesystem i de fleste tilfælde er det absolut bedste for den funktionshæmmede.

Vores dynamiske siddesystemer er alle multi-justerbare for at kunne opnå bedst mulige siddestilling til den enkelte.

Trepunktspositionering


Justerbare kropsstøtter sammen med hoftestøtte giver mulighed for at positionere overkroppen, hvilket mindsker risikoen for fejlstilling. God postural kontrol leder til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har hermed muligheden for både at korrigere samt bibeholde positioneringen af overkroppen.

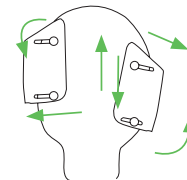

Flex-funktion/hoftevinkeljustering

Dynamisk støtte giver bevægelsesfrihed, variation samt kan have en beroligende effekt ved extensionsspasticitet.


Ryggen er stilbar i hoftevinkel, og siddesystemet er udstyret med et flex-led, hvilket gør ryglænet fleksibelt. I stedet for at brugeren presser imod en fast ryg, og bækkenet glider frem, opnår man den fordel med flexryggen, at ryggen på stolen bevæger sig bagud med brugeren, og brugeren ”kommer af” med sin spasticitet.

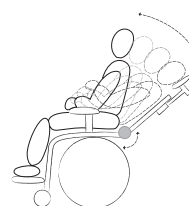

Bækken- & benpositionering

Kombinationen af et korrekt indstillet siddesystem, optimal sædebrønd, effektivt hoftebælte og en velstøttet lænd giver forudsætningerne for at mindske shear og fremadskridning, hvilket understøtter aktivitet og postural kontrol.

Sædedelen er trinløs justerbar i sædedybde og abduktion/adduktion hvilket muliggør optimal individuel siddestilling og lader samtidig brugeren vokse med siddesystemet.

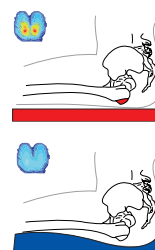

Understøtter barnets naturlige udvikling.

Et barn, som har siddestillingsproblemer og som får mulighed for at sidde i et velpositioneret siddesystem vil undgå mange af de problemer, som en der sidder i et ikke optimalt tilpasset siddesystem vil opleve. En ukorrekt siddestilling fører til, at barnet selv forsøger at løse problemet ved hjælp af kompensation, hvilket fører til yderligere fejlstillinger, som kan blive permanente over tid. Det er ekstremt vigtigt at sidde så korrekt som muligt, så kroppen kan udvikle sig og få hjælp til at vokse i den rigtige position.



Delfi Pro / Sharky Pro

- + Giver støtte til aktivitet.
- + Forhindrer fejlstillinger.
- + Kompenserer eller korrigerer fejlstilling.
- + Bryder spasticitet.
- + Positionerer.
- + Mulig at vokse i samt at justere ifht. at korrigere barnets siddestilling.

Delfi Pro / Sharky Pro

- + Dynamisk siddesystem med stort udvalg af tilbehør.
- + Store justeringsmuligheder, vokser med barnet.
- + Passer både til indendørs- og udendørsstel.
- + Brugervenlig.
- + Crashtestet og godkendt.
- + Muligt at justere f.eks. fodstøtter, kropsstøtter og armlæn uden brug af værktøj.



- + Alle vores betræk kan vaskes på 60°





Zitzi Delfi Pro

Dynamisk siddesystem med optimal støtte til børn/unge

Zitzi Delfi Pro er et dynamisk siddesystem for børn og unge med mange indstillingsmuligheder, hvilket giver gode forudsætninger for at skabe en funktionel siddestilling.

Zitzi Delfi Pro gør det muligt for brugeren at udvikle sig og vokse i siddesystemet ved at man hele tiden kan tilpasse sædet for derved at give den rette støtte der hvor brugeren har brug for det.

Størrelser	5 stk.
Abduktion / Adduktion	-9°/+18°
Brugerhøjde	80-170 cm
Max brugervægt	90 kg
Axilhøjde	17-40 cm
Kropsbredde	14-31 cm
Sædebredde	24-38 cm
Sædedybde	14-45 cm

Farver på
betræk



betræk

"Alcantara" look
betræk

Eksempler på **tilbehør**



Støttebord



Hel fodplade



Delt fodplade



Kaleche



Skålformede armlæn



Delfi Pro på kørestolsstellet Guppy G2 .



Zitzi Sharky Pro

Dynamisk siddesystem med optimal støtte til unge/voksne

Zitzi Sharky Pro tager over der hvor Zitzi Delfi Pro slutter i størrelsen. Sharky Pro er udviklet til unge og voksne med siddestillingsproblematikker. Sharky Pro har tilsvarende mange indstillingsmuligheder som Delfi Pro, hvilket giver gode forudsætninger for at skabe balance i kroppen.

Zitzi Sharky Pro er et trygt, stabilt og fleksibelt siddesystem som vokser med brugeren indtil vedkommende er voksen. Det er et dynamisk siddesystem til unge og voksne med mange indstillingsmuligheder, som muliggør stabilitet og funktionalitet i siddestillingen. Zitzi Sharky Pro vokser med brugeren og giver støtte netop der, hvor brugeren har behov for det.



Sharky Pro på kørestolsstel Seabass Pro.

Størrelser	2 stk.
Abduktion / Adduktion	-9°/+18°
Brugerhøjde	150-195 cm
Max vægt	130 kg
Kropsbredde	27-38 cm
Brystkassedybde	21-25 cm
Sædebredde	36-50 cm
Sædedybde	37-55 cm

Betræk farver



Grå/brun
farve



"Alcantara"
look (std.)

Eksempel på **tilbehør**



Bord



Delt fodplade



Armlæn



Vipbare armlæn



Albuestop



Zitzi Active

Et aktivt siddesystem til børn og unge

Størrelser	5 stk.	Rygvinkel	-15° til +25°
Max brugerlængde	185 cm	Hoftebredde	23-41 cm
Max brugervægt	90 kg	Sædedybde	27-46 cm
Abduktion	28°		
Sædevinkel	-15°		

Zitzi Active er designet på en måde, som forhindrer bækkenet i at kippe bagud. Stolen giver med sit design og fremad kippede sæde fantastisk mulighed for "postural kontrol". Zitzi Active giver børn og unge en bedre siddestilling, hvor en traditionel arbejdsstol ikke er nok.

Du kan skifte siddestillingen fra aktivt siddende til en hvileposition. I den forreste vippeposition, sidder du i en såkaldt rytterposition, som tilskynder kroppen til at strække sig og gør det sværere at hænge/"falde sammen".

Stolen har en "indbygget mobilitet", som er godt for børn og unge, der har nedsat muskelstyrke og/eller spasticitet. Stolen giver balance og sikkerhed og forhindrer fremadskridning.

Zitzi Active fakta

- + Tilbydes i 5 størrelser
- + Justeringsmuligheder i ryggen
- + Passer til børn og unge med i højden 100 - 185 cm
- + Flere farver på plastskalet og betræk
- + Tilbehørsprogram som knæstøtter, fodstøtter, håndbøjle, hovedstøtter, armlæn og seler
- + Passer til forskellige kørestolsstel

Eksempler på **tilbehør** til Active



Støttehåndtag



Armlæn



Knæstøtte



Zitzi Active på kørestolsstel Flipper G2.



Betræksfarve:



Anatomic Motion Seat

Dynamisk siddesystem til unge og voksne

Størrelser	14 stk.	Max vægt	90 kg
Abduktion pro	Integreret	Kropsbredde	15-38 cm
Abduktion adv	0°/+18°	Kropsdybde	10,5-18 cm
Adduktion adv	0°/-9°	Sædebredde	25-45 cm
Brugerhøjde	95-205 cm	Sædedybde	25-58 cm

I Anatomic Motion Seat kan personer med spasticitet bevæge sig, komme af med ufrivillige bevægelser og alligevel bevare den gode siddestilling.

Anatomic Motion Seat siddesystem er specielt udviklet til brugere med ekstensionsspasticitet og svære siddeproblemer. Brugeren bevarer sin positionering af kroppen og får dermed en blid bevægelse i hofte, ryg og knæled og forhindrer fremskridning.

Muligheden for ekstension i hofte- og knæled aflaster trykket på siddeknoglerne (tuber) og mindsker risikoen for tryksår.

Ekstensions- og fleksionsmodstanden i både hofte- og knæled justeres individuelt ved hjælp af gaspatroner, som gør bevægelses-området kontrolleret og sikkert, hvor brugeren har brug for det.

Anatomic Motion Seat tilbydes i følgende modeller:

- Pro - med hel siddeenhed/pude
- Advanced - med delt siddesystem til en mere avanceret siddestilling
- Individual - med et helt individuelt formstøbt sæde.

Eksempler på **tilbehør** til Motion Seat



Armlæn



Div. fodstøtte



Kropsstøtte



Lægstøtte



Motion Advanced på et Guppy G2 kørestolsstel



Anatomic Motion Seat i funktion



Zitzi Starfish Pro & Starfish mini

Kombineret bad- og toiletstol



At være i stand til at håndtere sin hygiejne på en sikker og komfortabel måde, bør være en selvfølge for alle. Zitzi Starfish Pro er en smart hygiejne stol med gode muligheder for individuelle indstillinger, der passer til forskellige behov.

Zitzi Starfish Pro er stabil og ergonomisk designet, hvilket giver et sikkert og stabilt alternativ, som kan tilpasses forskellige behov og situationer.

Zitzi Starfish Pro serien har et trykafastende betræk. Betrækket er specialfremstillet til hygiejne-situationer og er både væske- og smudsafvisende samtidig med at det føles behageligt mod kroppen.

Man kan trinløst abducere, adducere eller justere længden på bendelene individuelt. Alt sammen for at opnå en så optimal siddestilling som muligt og samtidig muliggøre at brugeren kan vokse med hjælpemidlet. Muligheden tilbydes også til kateterisering, eftersom der er bedre plads mellem bendelene.



Starfish Pro Manuel

Fast stel men med manuel justering (uden værktøj) til en sædehøjde mellem 53-63 cm.



Starfish Pro Hydraulisk

Fast stel men med manuel justering (uden værktøj) til en sædehøjde mellem 53-78 cm.



OBS!
Til Starfish Pro
tilbydes positione-
ringssele og bælte
fra vores Support
Pro hygiejneserie.
Produkterne er
blå.

STARFISH PRO

Størrelser:	3 stk.
Antal modeller	2
Brugerhøjde:	120-200 cm
Tilt:	+5° til -30°
Hofte-/rygvinkel:	+10° til -35°
Max brugervægt:	150 kg



Starfish Pro stellet kan bestilles alene og bruges til vores formstøbte hygiejnesæde. Stellet er rustfri og er i det hele taget fremragende til alle typer bad- og toiletsæder.

Sæderammen har dobbelte rilleprofiler til glidende justering og nem justering af sædeposition.

Stellets sæde kan tiltes fra -5 ° til + 30 °. Rygdelen kan vippes separat i forhold til sædedelen fra -10 ° til + 30 °. Dette er praktisk, hvis du har et bad- eller hygiejnesæde med delt sæde og ryg.



Starfish Pro Manuel

Fast stel men med manuel justering (uden værktøj) til en sædehøjde mellem 53-63 cm.



Starfish Pro Hydraulisk

Fast stel men med manuel justering (uden værktøj) til en sædehøjde mellem 53-78 cm.



Nyhed

Starfish Pro har fået en lillesøster, nemlig Starfish mini, som er til børn og unge.

STARFISH mini

**Bad- & toiletstol
- fleksibel og stabil**

- ✓ Til børn og unge
- ✓ Tilbydes i 3 størrelser.
- ✓ Passer brugerhøjde 90–145 cm
- ✓ Max belastningsvægt 80 kg.
- ✓ Helt rustfri.
- ✓ Flere justeringsmuligheder.
- ✓ Kan forhøjes / sænkes 2,5 cm.
- ✓ Tilt: 25° bagud, 5° fremad
alt. 30° bagud, 0° fremad.
- ✓ Enkel justering af sædedel og ryg.
- ✓ Kan monteres med meget tilbehør.

Højde- & sænkbar ryg

Højde- & sænkbar ryg som også kan vippes separat i forhold til sædedelen fra 60° bagud til 20° fremad. Monteringsmuligheder af tilbehør som kørebøjle, hovedstøtte mv.



Justerbar sædedel

Justering af sædedybde og positioner til bad eller toilet.





✓ Justerbart tilt

Ryglænet kan også vippes separat ifht. sædet :
60° bagud, 20° fremad.



Tekn.data stel

Bredde (B)	50 cm
Længde (L)	67 cm
Max brugervægt	65 kg
Max belastningsvægt	80 kg
Frigang toilet	42.5 / 45 / 47.5 cm
Tilt	25° bagud til 5° fremad alt. 30° bagud til 0° fremad
Hjul	10 cm

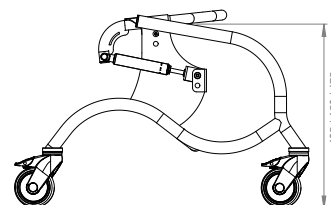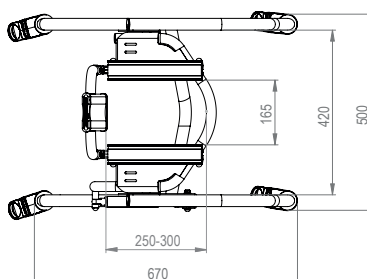

Brugerhøjde ca. 90–110 cm

Sædebredde 22 cm

Sædedybde 23–28 cm

Kropsbredde 18 cm

Ryghøjde 30 cm

STR. 1

Brugerhøjde 110–130 cm

Sædebredde 22 cm

Sædedybde 28–33 cm

Kropsbredde 20 cm

Ryghøjde 35 cm

STR. 2

Brugerhøjde 130–145 cm

Sædebredde 26 cm

Sædedybde 33–37 cm

Kropsbredde 22 cm

Ryghøjde 40 cm

STR. 3



Kørestolsstel

Vi har kørestolsstel både til indendørs- og udendørs brug. Vores kørestolsstel er specielt udviklet til vores modulopbyggede siddesystemer og individuelle formstøbte sæder. Hvis du vælger et af vores kørestolsstel, når du vælger et sæde fra os, sikres du den bedst mulige kombination af siddesystem monteret på et kørestolsstel.

Da vi begyndte at udvikle og tilbyde kørestole i 1990, var visionen at kunne opfylde alle brugernes behov. I dag har vi kørestole, der passer til de fleste mennesker. vores kørestole er lette at tilpasse til forskellige siddesystemer og giver plads til f.eks. fodstøtte, armlæn og rygvinkler. De har alle gode tilt muligheder, da vi ved, at det er vigtigt at kunne hvile og slappe af. Mange af vores kørestole har "tilt in space". Der er mange forskellige muligheder og varianter af hjul for at passe så mange behov som muligt.



Hvilket siddesystem passer sammen med hvilket kørestolsstel:

KØRESTOLSSTEL SIDDESISTEM	Flipper G2			Flipper Flex G2	Pengy Vogn	Guppy G2			Seabass G2			Mika	Galileo
	Str. 2	Str. 3	Str. 4 XL			Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 2	Str. 2
Pengy Pro str. 1-2	x			x	x	x	x		x				
Delfi Pro str. 0	x			x	x	x			x				
Delfi Pro str. 1	x			x	x	x			x				
Delfi Pro str. 2	x			x	x	x							x
Delfi Pro str. 3		x		x		x	x ²	x ²				x	x
Delfi Pro str. 4			x	x			x ²	x ²		x		x	x
Sharky Pro str. 1			x	x				x		x ²		x	x
Sharky Pro str. 2			x	x							x ²	x	x
Active str. 1	x ¹			x								x	
Active str. 2	x ¹	x ¹		x				x ¹				x	x
Active str. 3	x ¹	x ¹		x				x ¹					
Active str. 4		x ¹	x ¹	x				x ¹					
Active str. 5			x ¹										
Anatomic Motion Seat str. ³	0-2	2-3	4-7	0-5		0-2	2-3	4-9 ⁴	0-2	2-3	4-9		
Anatomic formstøbt sæde	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³	x ³

¹ Active i kombination med Flipper G2, anvend rammeforlængning for at minimere risiko for tilt

² Afhængigt af hvilken størrelse hjul man vælger

³ Afhængigt af det formstøbte sædes størrelse samt max belastningsvægt på kørestolsstellet

⁴ Anatomic Motion Seat str. 9 kræver Guppy str. 3 - bred



Zitzi Buster

Kørestolsstel til børn og unge

Buster er et stabilt kørestolsstel til aktiviteter i indendørs miljøer som f.eks. hjem og skole.

Velegnet til både aktive brugere, der kan komme rundt på egen hånd (f.eks. ved at sparke med fødderne), eller til dem, der har brug for hjælp fra en hjælper til at styre.

- ✓ Passer til modulopbyggede siddesystemer.
- ✓ Til aktiviteter i indendørsmiljøer, for eksempel derhjemme, i skolen eller på kontoret.
- ✓ Velegnet til både uafhængige brugere, og brugere, der har brug for hjælp fra hjælper.
- ✓ **Buster EL** max belastningsvægt 100 kg.
- ✓ **Buster Manuel** til brugere mellem 40–70 kg som selv kan betjene justering af højde og tilt. Mulighed for tilpasning til lavere eller højere brugervægt er tilgængelig.
- ✓ **Buster** leveres som standard med centralbremse på baghjulene samt retningslås.

Buster EL (bruger-/ hjælperstyret)

Belastningsvægt	100 kg (max)
Højdejustering	Elektrisk
Tiltjustering	Elektrisk
Tiltvinkel	7° bagud til 16° fremad alt. 16° bagud til 7° fremad

Hjul	100 mm
Totalbredde	60 cm
Totallængde	67 cm
Sædehøjde (min)	41 cm
Sædehøjde (max)	61 cm

Buster Manuel (bruger-/ hjælperstyret)

Belastningsvægt	90 kg (max)
Højdejustering	Manuell
Tiltjustering	Manuell
Tiltvinkel	7° bagud til 16° fremad

Hjul	100 mm
Totalbredd	60 cm
Totallængde	67 cm
Sædehøjde (min)	41 cm
Sædehøjde (max)	61 cm



Siddesystemet Active på kørestolsstellet Buster

ANBEFALET SIDDESYSTEM	EL Hjælperstyret	EL Brugerstyret	EL Hjælperstyret med mere bagudtilt	MANUEL Hjælperstyret	MANUEL Brugerstyret
Active Uni str. 1	✓	✓		✓	✓
Active Uni str. 2	✓	✓		✓	✓
Active Uni str. 3	✓	✓		✓	✓
Active Uni str. 4	✓	✓		✓	✓
Active G2 str. 1			✓		
Active G2 str. 2			✓		
Active G2 str. 3			✓		
Active G2 str. 4			✓		
Delfi str. 1			✓		
DDelfi str. 2			✓		
Delfi str. 3			✓		
Delfi str. 4			✓*		
Sharky str. 1			✓*		
Formstøbte sæder	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**

* anvend anti-tip, hvis tipperisiko

** Afhængig af sædets udformning



Mika
Stabil og letkørende



Galileo
Fleksibel og letkørende

Mika er et stabilt kørestolsstel til indendørs- og udendørsbrug, som tilbyder mange justeringsmuligheder bl.a. gennem sin mekanik under sædepladen. Der findes to typer rammer, en standard og en Y-ramme. Sidstnævnte giver ekstra plads til fodstøtten. Af tilbehør tilbydes bl.a. anti-tip støtte og tippepedal.

- Meget funktionel og et godt tilt
- Indendørs- og udendørsstel

Galileo er et fleksibelt og letkørende kørestolsstel til børn og unge. Stellets kompakte konstruktion gør at det passer perfekt, når man har behov for et mindre kørestolsstel. Endelig er det enkelt at justere, så det nemt kan tilpasses den enkeltes behov og mål.

- Centralbremse på baghjulene
- Meget let stel og letkørende

Størrelser	4 stk.
Farve	Sølvgrå/sort
Vægt	16 kg

Belastningsvægt	130 kg
Tilt	+30°
Sædehøjde	41/46 cm
Hjul	12", 20", 22", 24"

Crashtestet	Godkendt
--------------------	----------

Størrelser	6 stk.
Farve	Sort
Vægt	13,5 kg

Belastningsvægt	120 kg
Tilt	40°
Højdejusterbar	Ja
Sædehøjde (min)	41,5 cm*
Sædehøjde (max)	49 cm*

* Målene ændres afhængig af, hvilket sidde-system og hvilke størrelse hjul du vælger.



Zitzi Flipper G2

Hi-low indendørsstel

Zitzi Flipper G2 er et indendørsstel med 125 mm hjul, så man nemt kan køre over måtter, dørtrin og andre forhindringer. Det findes i to varianter; manuel eller elektrisk. Man kan enkelt tilte sædedelen uden at det forårsager instabilitet i kørestolsstellet.

- + Tilbydes i størrelse 2, 3 eller 4XL
- + Manuel eller elektrisk højde- & tiltjustering
- + Forskellige kørehåndtag

Størrelser	3 stk.
Farve	Matsort
Kombinationer	8 stk.

Belastningsvægt	50/75/130 kg
Tilt	0° til +30° / -5° til +25°
Højdejusterbar	Ja
Sædehøjde (min)	28/ 34/ 45 cm*
Sædehøjde (max)	64 / 64/ 71 cm*

Hjul, standard	125 mm
----------------	--------

* Dimensioner angiver chasis højde og ændres afhængigt af hvilket siddesystem, du vælger

Eksempel på **tilbehør**



Stor kørebøjle



Kørebøjle



Hel fodstøtte



Rammeforlænger



Anti-tipstøtte



Zitzi Flipper Flex G2

Hi-low inden- og udendørsstel

Zitzi Flipper Flex G2 er et højde- og sænkebart kørestolsstel til både indendørs- og udendørsbrug. Mulighed for at tilte sædeenheden uden at det påvirker vægtdistributionen.

Tilbydes i 3 udformninger:

- + Manuel højde- og sænkefunktion/manuel tilt
- + Elektrisk højde- og sænkefunktion/manuel tilt
- + Elektrisk højde- og sænkefunktion/el-tilt

Størrelser	1 stk.
Modeller	3 stk.
Farve	Matsort

Belastningsvægt	75 kg
Tilt	0° til +30° / -5° til +25°
Højdejustering	Ja
Hjul	7" og 12" / 16"
Sædehøjde (min)	38 cm*
Sædehøjde(max)	71 cm*

Totalbredde	63 cm
Totallængde	81 cm

Crashtestet	Godkendt
-------------	----------

* Dimensioner angiver chassis højde og ændres afhængigt af hvilket siddesystem, du vælger

Eksempel på **tilbehør**



Tippepedal



Anti-tip støtte



Transportbeslag



Retningsholder



Delt fodstøtte



Zitzi Guppy G2

Lille, let og fleksibel

Guppy G2 er et lille, let og fleksibelt kørestolsstel med gode køreegenskaber. Passer perfekt sammen med Zitzi Delfi Pro og små Anatomic formstøbte sæder.

Guppy G2 har flere fordele:

- + Enkel at balancere
- + Mange valgmuligheder
- + Crashtestet og godkendt
- + Mulighed for hjælpemotor (E-drive)
- + Helt i aluminium

Størrelser	4 stk. (str. 1, 2, 3, 3-bred)
Farve	Matsort
Belastningsvægt	75
Tilt	0° til +31° / -6° til +29°
Sædehøjde	46/48/50 cm
Hjul	16", 20", 22" og 24"
Crashtestet	Godkendt

Eksempel på tilbehør



Armlæn



Opklappelig fodplade



Hjul 16"



E-drive



Stænk skærm



Zitzi Seabass G2

Til de større siddesystemer

Zitzi Seabass G2 er et kørestolsstel til større siddesystemer og Anatomic formstøbte sæder. Det er muligt at tilte sædedelen uden at påvirke tyngdepunktet i stellet. (tilt in space).

Zitzi Seabass G2 fordele er blandt andet:

- + Tilbydes i to sædehøjder
- + Mange tilbehørs- og justeringsmuligheder
- + Tilbydes i 3 størrelser med drivhjul fra 12-24"
- + Mulighed for hjælpemotor (E-drive)
- + Crashtestet og godkendt

Størrelser	3 stk.
Farve	Matsort
Vægt	20 kg

Belastningsvægt	135 kg
Tilt	0° til +35° / -7° til +28°
Sædehøjde	41/46 cm
Hjul	12", 16", 20", 22", 24"

Crashtestet	Godkendt
-------------	----------

Eksempel på **tilbehør**



Tippepedal




Anti-tip støtte



Skærm



E-drive

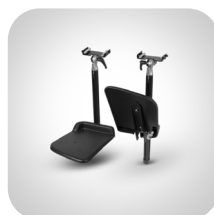

Fodstøtte delt



Armlæn



EasyStand

Kom op at stå

At stå er nødvendigt og hjælper med at holde benene stærke og mindsker afkalkning af skellet. Personer som sidder i kørestol bør stå regelmæssigt, som en del af deres rehabilitering.

En af de gode funktioner ved EasyStand er, at du nemt kan komme fra siddende til stående position og tilte hele ståhjælpemidlet til den vinkel som ønskes, uanset position.

EasyStand tilbydes i mange forskellige varianter med forskellige funktioner. Fælles for produkterne er, at de er sikre og brugervenlige for at kunne opretholde og udvikle deres fysiske muligheder.

Størrelsesguide

Str. 1: Brugerhøjde: 51-112 cm

Str. 2: Brugerhøjde: 102-152 cm

ZING
MPS

	STR. 1	STR. 2
Tilt	-20-90°	-20-90°
Abduktion	30°	30°
Vægt	25 kg	37 kg
Farve	Grøn/hvid	Grøn/hvid
Max brugervægt	32 kg	70 kg

Tilt 0 til +90°

X-SMALL
Max brugervægt 45 kg
Brugerhøjde 71-101 cm

SMALL
Max brugervægt 45 kg
Brugerhøjde 91-137 cm

MEDIUM
Max brugervægt 91 kg
Brugerhøjde 122-168 cm

BANTAM

EVOLV

MEDIUM
Max brugervægt 90 kg
Brugerhøjde 122-168 cm

LARGE
Max brugervægt 127 kg
Brugerhøjde 152-188 cm

X-LARGE
Max brugervægt 159 kg
Brugerhøjde 183-211 cm



EasyStandli

Bantam X-Small/Small/Medium

Med EasyStand Bantam kan du enkelt komme fra siddende til stående stilling. Hvis man er utryg ved at komme op at stå, kan det at bruge det naturlige bevægelsesmønster give en stor tryghed, som her ved EasyStand Bantam. Bordet følger med i hele bevægelsen og giver brugeren ekstra støtte og tryghed.



Evolv/Evolv Mobil

Oprejsningen sker trinkløst, Manuelt eller med el. Giver brugeren mulighed for selv at vælge, hvor hurtigt det skal gå fra siddende til stående position.

Med EasyStand Mobil gives endvidere mulighed for selv at forflytte sig i stående stilling.



Zing MPS

Easystand Zing MPS er let at justere takket være justeringsknapperne. Zing MPS er rettet mod en bred målgruppe, da den vokser med barnet og tilpasser sig barnets skiftende behov. Zing MPS kan fungere som et simpelt hjælpemiddel, eller til børn med komplekse behov. Ingen særlig tilpasning er nødvendig, når den skal bruges af børn med kontrakturer. Zing MPS muliggør også abduktionsstående stilling.



Glider

EasyStand Glider er designet til den aktive bruger. Glideren har justerbar modstand og tilpasses enkelt efter behov og brugerens egne forudsætninger. Det fremmer bevægeligheden i fodled, knæ og hofter, samtidigt styrkes hjertet, overkroppen og konditionen.



Zing Transportabel - Nyhed

Med den nye Zing Transportabel kan man stå overalt og når som helst. Med 3 sammenklæpkelige ben, et bærehåndtag og en vægt på under 10 kg bliver det let at flytte ståstativet fra et rum til et andet. Zing Transportabel pakkes væk, uden at tage ret meget plads.

Se mere på www.anatomicitt.dk





Support Pro

Positioneringsseler og bæltter

Vores Supportserie består af forskellige positioneringsprodukter. Der er blevet forbedret og videreudviklet på produkterne i mange år. De giver en fantastisk støtte og positionering. Opdateringen af produktserien gælder bl.a. nyt design, flere modeller og varianter.

Brystseler

Vi har to typer af seler til overkroppen, H-sele og Sternumstøtte.



Hoftebælte

Vi tilbyder 3 typer hoftebæltter. Sittbælte med 2 eller 4 fæstningspunkter, samt antirotationsbælte.



Ankelbespænding

Ankelbespændingen giver en stabil støtte og holder fødderne på fodpladerne. Ankelbespændingen monteres på forskellige fodstøtter ved at skrue fæstestropperne i fodpladen.



Armbind

Armbind monteres diagonalt og benyttes for at afhjælpe ufrivillige bevægelser samt for at hindre overstrækning af leddene. Materiale i Soft-Skai, hvilket betyder en blød inderside med en let aftørrelig yderside.



Håndmanchet

Et hjælpemiddel for de brugere, som har besvær med at fikse hånden/hænderne på styret/kørehåndtaget.



Fodrem

En nem måde at positionere fødder på, monteret i fodpladen. Tilbydes med eller uden polstring.



FMK®

FMK® er et universelt monteringskit til at gøre montering af positioneringsseler og hovedstøtte lettere. Monteres omkring kørestolens skubbehåndtag/kørehåndtag eller rygrør. Bruges også til at få den rigtige trækretning på positioneringsstøtten.



Universalbælte

Et stærkt elastisk bælte med mange anvendelsesområder. Designet gør det nemt at afkorte efter behov.

Anvend det som støtte rundt om hoften, lårene eller underben, over brystet, eller over maven. Anatomic Universalbælte, som trinfæstet ved hjælp af en velcro-lås kan fastgøres, nøjagtigt, hvor man ønsker det. Velcrolåsen er ekstremt stærk i trækretningen.



Hoftebælte - til positionering af bækkenet

Et hoftebælte kan være mindst lige så vigtigt, som en trykaflastende pude. Vores hoftebælter og y-seler anvendes for at holde bækkenet i rette position, samt modvirke fremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og sædeknoglerne, eller træk i huden.

Vi tilbyder 3 typer af hoftebælter:

- Sittbælt med 2 fastgørelsespunkter (Comfort),
- Sittbælt med 4 fastgørelsespunkter,
- Antirotationsbælte

Bælterne tilbydes med forskellige spænder og trækretninger.

- Enkelttræk.
- Dobbelttræk.

Bæltepuderne tilbydes i to forskellige materialer:

Soft Stretch/Neopren
Ekklusiv Skindlook.

To eller fire fastgørelsespunkter?

Vi har to forskellige modeller af Sittbælt, 2-punkts-bælte og 4-punktsbælte (Y-sele). Det som adskiller bælterne er antallet af fastgørelsespunkter på hver side. 2-punktsbæltet er med til at støtte og modvirke fremadskridning. 4-punktsbæltet passer til alle typer brugere og bruges til optimal positionering af bækkenet og støtter og stabiliserer bækkenets stilling.

• Sittbælt komfort med 2 fastgørelsespunkter

- Enkelt hoftebælte, bruges til komfortkørestole.
- Bælterne tilbydes med fast eller justerbar bæltepude.
- Findes i materialet: soft.

• Sittbælt med 4 fastgørelsespunkter

- Passer alle typer brugere og giver en god positionering og modvirker fremadskridning.
- Anvendes oftest i støb/siddesystemer samt mere avancerede kørestole.
- Bælterne tilbydes med fast eller justerbar bæltepude.
- Findes i materialet: soft.

• Antirotationsbælte med 4 fastgørelsespunkter

- Giver meget positionering og modvirker fremadskridning og rotation af bækkenet.
- Anvendes oftest i støb/siddesystemer.
- Findes i materialet: soft med gel.



Sittbælt med 2 fastgørelsespunkter (Comfort)



Sittbælt med 4 fastgørelsespunkter



Antirotationsbælte

Support Blå – passer til vores bad- og toiletstole

Det er også vigtigt at sidde godt på toilettet og i badet. Selerne og bælterne monteres nemt. Fås i flere størrelser.



Brystseler - opnå ønskede postural kontrol

God postural kontrol fører til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har således muligheden for både at korrigere og opretholde overkroppens placering på baggrund af de forhold, vi står over for.



H-sel

H-selen giver støtte til både skulderparti og krop. Den bruges ved rotation og til brugere med fremadfald. Passer også godt til borgere, som bruger sonde.



Sternumstøtte

Sternumstøtten giver en koncentreret støtte over sternum, for at modvirke at overkroppen falder fremover, hvilket også giver bedre forudsætning for at forbedre hovedkontrollen.



Skuldersele

Vores skulderstropper har en god polstring. Disse kan også anvendes til at positionere en side af kroppen.



Thoraxsele Pro

Thoraxselen er udviklet til brugere med lav muskel tonus. Selen hjælper til at positionere gennem et løft helt nede fra lænderyggen.



Anatomic brystbælte

Brystbæltet giver stor bevægelsesfrihed for armene. Bæltet giver behagelig og jævn støtte til overkroppen. Brystbæltet har en hel bred polstring og har to bespændingspunkter.



Brystbælte Basic

Har en enkel og hurtig åbning / lukning med velcrobånd.



Brystbælte Zitzi

Har en sikker åbning/lukning med uniloop velcro lukning.

HUSK!

- Brystseler skal kombineres med hoftebælte.
- Trækretningen for de øverste fæstepunkter bør være over skulderparti for at forhindre at skuldrene trykkes nedaf. Ved behov kan man købe en forhøjningsstang.



Vaskbare ved 60°

Samtlige materialer er vand- og smudsafvisende og nemme at tørre af. Samtlige seler og bæltter kan vaskes ved 60°. Det anbefales at vaske dem i vaskepose.

John seler

Sædeseler

En sædesele kan holde bækkenet i rette position, samt modvirke fremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og sædekuglerne, eller træk i huden.

Selerne monteres nemt og fås i 3 modeller. Alle 3 modeller fås i 4 forskellige størrelser og i materialerne; bomuld, skai og neopren.



Standard



Kontur



T-model

A2J

Retraktionsbælter



Teknologi som støtter

Stabilitet og komfort i 2D og 3D - teknologi.

A2J seler indeholder et sortiment af retraktionsbælter for bedre positionering i sædet.

Bælterne fås eksempelvis som; lårbælte, knæramme og forskellige bækken-retraktions-bælter. Bælterne fås i flere forskellige størrelser.



ProSerie

Hovedstøtte

Mange personer med funktionsnedsættelser har problemer med at stabilisere og koordinere hovedets stillinger og bevægelser. Årsagen hertil kan bl.a. skyldes for høj eller for lav tonus i muskulaturen. Ved hjælp af en individuel indstillet hovedstøtte kan daglige aktiviteter som det at spise, se sig omkring og kommunikere lettes. Hovedstøtten monteres enkelt på kørestol og siddesystem takket være mange forskellige adapterstænger/beslag.



Billedet viser:
76001 Pro Voksen, lange nedre støttepuder
77101 Aktivt pandebånd, voksen.


Eksempler på vores hovedstøtter




Plush




Plush justerbar

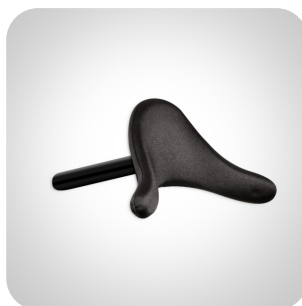

Mini

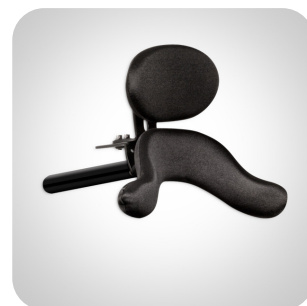

Enkel nedre

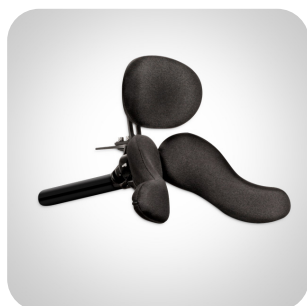

Voksen



Junior



Heads Up



Sidestøtte



Aktivt pandebøjle



Aktivt pandebånd



Cervistøtte

Cervistøtte er en halskrage med lav vægt og samtidig stor støtte for hovedet. CerviStøtten er tiltænkt personer med svækkede nakkemuskler, evt. hvor hovedet falder forover. Den cervikale halskrave er diskret, men funktionel. Letvægts, luftig og klædt med et blødt vaskbart betræk. cervistøtten er ikke en del af ProSerien.



Symmetrisleep

Et led i 24 timers postural omtanke

Symmetrisleep muliggør, at personer med problemer i bevægeapparatet kan ligge stabilt. Liggesystemet kan forebygge yderligere progrediering af diverse deformiteter og i visse tilfælde endda korrigerer allerede eksisterende problemer, når systemet bruges som en del af et 24 timers positionerings program.

Symmetrisleep fungerer:

- Mave-, ryg- og sideliggende.
- Ved at systemet placeres ovenpå en seng.
- På forskellige typer madrasser - også tryksårsforebyggende madrasser.

Symmetrisleep er:

- Nemt og enkelt at rengøre.
- Let transportabel.
- Brandhæmmende.
- Enkel at montere og tilpasse.

Hvordan bruges Symmetrisleep?

Når velcro lagenet, den tryksårsforebyggende topmadras og det strækbare lagen er på plads, er liggesystemet klar til brug. Det foretrækkes og letter forflytningen, at sengens underlag er plant. Når brugeren er klar til det, monteres støtter og puder for at give den rette positionering. Fremfor at det er brugeren, som skal passe ind i systemet, tilpasses SymmetriSleep liggesystem fleksibelt til brugeren. Hjælpere oplever, at det bare tager et øjeblik at tilpasse systemet, og finjustering kan klares med det samme.

Tilpasning af støtterne er nemt og ligetil. Nogle hjælpere foretrækker at montere dem, mens brugeren sover. Husk at man kan bruge Symmetrisleep om dagen lige så vel, som om natten. Hvis bare liggesystemet er benyttet 2 timer om dagen, svarer det til 730 timer progressive passive terapi timer per år. Bruges liggesystemet hver nat, svarer det til ca. 3.600 timer, hvor kroppen er afslappet og har de bedste betingelser for restitution.

Primo til de mindste - Nyhed

Primo er et lejringsprodukt, der imødekommer specifikke støtte-behov hos 0-3-årige. Primo kan bruges både i dag- og nattetimer.



Primo Symmetrisleep

Det er aldrig for tidligt at starte med lejrings



Primo til de mindste -

Primo er et lejringsprodukt, der imødekommer specifikke støtte-behov hos 0-3-årige.

Symmetrisleep® Primo kan bruges i en eksisterende barneseng, lift eller på gulvet til terapi og leg.

Primo kan bruges både i dag- og nattetimer.

Acheeva

Sikker liggende positionering for bedre indlæring

Acheeva® muliggør, at skolebørn med komplekse og varige rehabiliteringsbehov nemt kan deltage i klassens aktiviteter.

I Acheevaen er arbejdshøjde og vinkler enkle at tilpasse, så børn kan få øjenkontakt og kommunikere.

En god arbejdshøjde er åbenlyst et plus for børnene og personalet.

Sårbare børn er bedre beskyttet, når de er hævet fra gulvet. Det tillader dem trygt og sikkert at blive involveret i flere aktiviteter.

Acheeva® tilbyder fuld støtte i rygliggende, maveliggende eller sideliggende position, samtidig med at den værner om kroppens form og respirationen.



SymmSlide

Enkelt vendesystem

SymmSlide er et nyt vendesystem. Det er designet til at fungere med lejringsystemet SymmetriSleep, men fungerer også fint med andre lejringsystemer.

Med SymmSlide er det nemt at vende borgeren i sengen og positionere i en ny stilling. SymmSlide giver ligeledes nedsat risiko for at skulle genpositionere borgeren. SymmSlide topmadras og velcrolagen kan også bruges uden lejringsystem.




Specialprodukter

Plurimeter

Vinkelmålingsinstrument

Med PluriMeter får du mulighed for at måle vinkelforholdet mellem forskellige kropsdele ved afprøvning af hjælpemiddel.

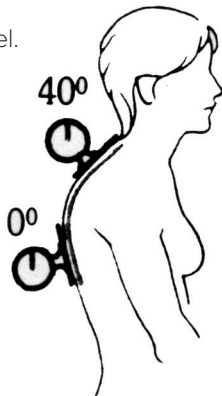

Køreposer

Tilbydes i to modeller, med eller uden fleece indeni.



JOGGER

En jogger giver frihed og muligheder i al slags terræn.

Store som små børn med fysiske handicaps kan i en jogger nyde udflugter til stranden, parken eller på vandrestier sammen med deres familier eller institution. Begge joggere er med store brede kalecher til at skærme for vejr og vind.



JOSI-Wismi G2



JOSI Pro

Mobilitet, der tilpasser sig livet – oplev **JOSI-Wismi G2**. JOSI-Wismi G2 er en helt ny sporty jogger. Den sætter nye standarder: Med en vægt på op til 4 kg mindre end sin forgænger og en mere kompakt foldestørrelse overbeviser den med sin nemme håndtering.

Den smallere sporvidde gør hverdagen endnu lettere uden at gå på kompromis med stabiliteten.

Som sædvanlig kan JOSI Wismi G2 også sættes på cyklen – lettere, mere kompakt og mere alsidig.

Josi Pro der er designet til at give sikkerhed og komfort til den som sidder i den, mens forældre eller plejere går eller løber. Den er let at manøvrere og er let at håndtere i forskellige terræner.

Josi Pro har en affjedring, der reducerer rystelserne, mens man går eller løber. Endvidere er der mulighed for at justere ryglænet og fodstøtten, så brugeren kan sidde eller ligge mere komfortabelt.

Josi-Wismi G2	Str. S	Str. M	Str. L
Varenummer	JW-300002	JW-300003	JW-300004
Vægt, ramme & besp.	18 kg	20 kg	21 kg
Brugerhøjde i cm	ca. 105-145	ca. 125-165	ca. 150-185
Sædehøjde inkl. pude	43 cm	43 cm	43 cm
Sædebredde	36 cm	42 cm	47 cm
Totalbredde	72,5 cm	77,5 cm	82,5 cm
Sammenklappet i cm	60x90x59	65x94x62	70x104x66
Max belastningsvægt	50 kg	70 kg	85 kg

Josi Pro	Str. S	Str. M	Str. L
Varenummer	JP-300002	JP-300003	JP-300004
Vægt, ramme & besp.	16,5 kg	18 kg	20 kg
Brugerhøjde i cm	ca. 105-145	ca. 125-165	ca. 150-185
Sædehøjde inkl. pude	57 cm	57 cm	59 cm
Sædebredde	36 cm	42 cm	46 cm
Totalbredde	63 cm	68 cm	73 cm
Sammenklappet i cm	55x102x59	60x105x62	65x110x 67
Max belastningsvægt	50 kg	70 kg	90kg

”Vores siddepuder henvender sig til en bred gruppe af kørestolsbrugere med lav, mellem eller høj risiko for at udvikle tryksår.”

AirZone Contour puden er en højrisiko pude, der trykflaster op til tryksårskategori high. Den er kontourformet for optimal trykfordeling, samt god pasform.

Puden er fremstillet med nyeste teknologi af polyurethan tråde og en ramme af skum, det gør puden ekstremt let og samtidig trykfordeler og luftfordeler den rigtig godt.

Airmantle-toplaget i Airzonen sørger for at transportere fugt væk og give en enestående trykreduktion.

CoolOver-betræk er standard på alle Airzone -puder.

Størrelser tilgængelige fra 25x25 cm til 75x75 cm og **max belastningsvægt er 254 kg.**

AirZone Contour



LowZone Gel2 Contour puden er en pude, der trykflaster op til tryksårskategori high. Puden er både konturformet og med en 2 komponent gel, der trykfordeler og absorberer/frigør varme efter behov, hvilket sikrer brugeren optimalt mikroklima og aflastning hele dagen!


LowZone Gel2 contour giver et meget højt niveau af trykaflastning, stabilitet omkring bækkenet, temperatur-regulering og komfort for brugeren. Geleen er indbygget i puden. Der er et skumlag ovenpå for at sikre at geleen altid forbliver, hvor den skal.

God ergonomisk formgivning hjælper med at fremme en neutral bækkenstilling, forbedrer stabilitet i rygsøjlen og reducerer tilbøjeligheden til at indtage en sammensunken kropsholdning. Gelindsatsen reducerer potentiel shear-risiko samt giver bedre stabilitet end skum.

Patenteret termoregulerende gelcelle-regulerer aktivt brugernes hudtemperatur for at forhindre overdreven svedtendens og sofistikerede betræk fremmer god luftstrøm for yderligere at reducere varme og fugtopbygning.

Størrelser tilgængelige fra 30x30 cm til 60x60 cm. Max belastningsvægt 158 kg.

LowZone Gel2 Contour

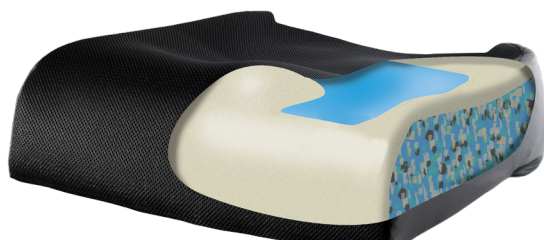

LowZone+ Contour puden er en pude, der trykflaster op til tryksårskategori medium. Puden er konturformet og lavet i viskoelastisk skum, der lader kroppen synke ned i materialet og yder en god trykfordeling og en høj komfort.

Skum er ikke bare skum og producenten har udviklet på det over de sidste 55 år og har derfor lavet en basispude, der ikke bare er basis, men trykfordeler bedre end lignende puder i samme kategori.

Størrelser tilgængelige fra 20x20 cm til 75x75 cm.
Max belastningsvægt 158 kg.

LowZone+ Contour





Hvem er din KONSULENT?

Vores konsulenter er erfarne terapeuter med hjertet på rette sted.

Vores produkter tager udgangspunkt i at ingen borgere er ens, og at optimal individuel tilpasning giver det bedste udgangspunkt for den enkelte.

Sammen med dig kan vi skabe den bedst mulige stilling. Du og dine kollegaer har et mere indgående kendskab til brugeren end vi har, og vi har mere indgående kendskab til, hvilke muligheder der er i vores produkter.

Sammen har vi de bedst mulige kompetencer og dermed de bedste forudsætninger for at skabe en optimal position for den enkelte.



Christoffer Winther
Ortopæd tekniker

Distrikt: Sjælland og Fyn

Tlf: 41 17 82 20
christoffer@anatomic-sitt.dk



Anette Holm
Konsulent og ergoterapeut
Distrikt: Stor del af
Sjælland og Bornholm
(se kort)

Tlf: 28 10 24 74
anette@anatomic-sitt.dk



Helene Sommer
Konsulent og ergoterapeut
Distrikt: Hovedstaden og
Ringsted, Køge, Faxe, Stevn mv.
(se kort)

Tlf: 28 11 21 74
Helene@anatomic-sitt.dk



H.C. Winther
Konsulent og direktør
Distrikt: Århus Kommune,
Grønland og Færøerne

Tlf: 21 27 01 76
hc@anatomic-sitt.dk



David Petersen
Konsulent og fysioterapeut
Distrikt: Region
Nordjylland, Region Midtjylland
(Minus Århus, Hedensted og
Ringkøbing-Skjern Kommune)

Tlf: 22 96 20 74
david@anatomic-sitt.dk



Jesper Wolbro Olsen
Ortopædtekniker, Konsulent & fys.
Distrikt ortopædtekniker:
Jylland og Fyn
Distrikt: Syddjurs, Norddjurs,
Favrskov, Odder og Skanderborg

Tlf: 41 28 28 98
jesper@anatomic-sitt.dk



Jørgen Frost
Konsulent og fysioterapeut
Distrikt: Region Syddanmark,
Hedensted og Ringkøbing-Skjern
Kommune

Tlf: 28 11 39 74
jorgen@anatomic-sitt.dk




Hvor er din KONSULENT?



Vores konsulenter er til for at hjælpe dig.

Vores konsulenter laver alle løsninger med alle produktgrupper: Sidesystemer, formstøbte sæder, nakkestøtter, kørestole, ståstativer, liggesystemer, positioneringsseler og bæltter mv.

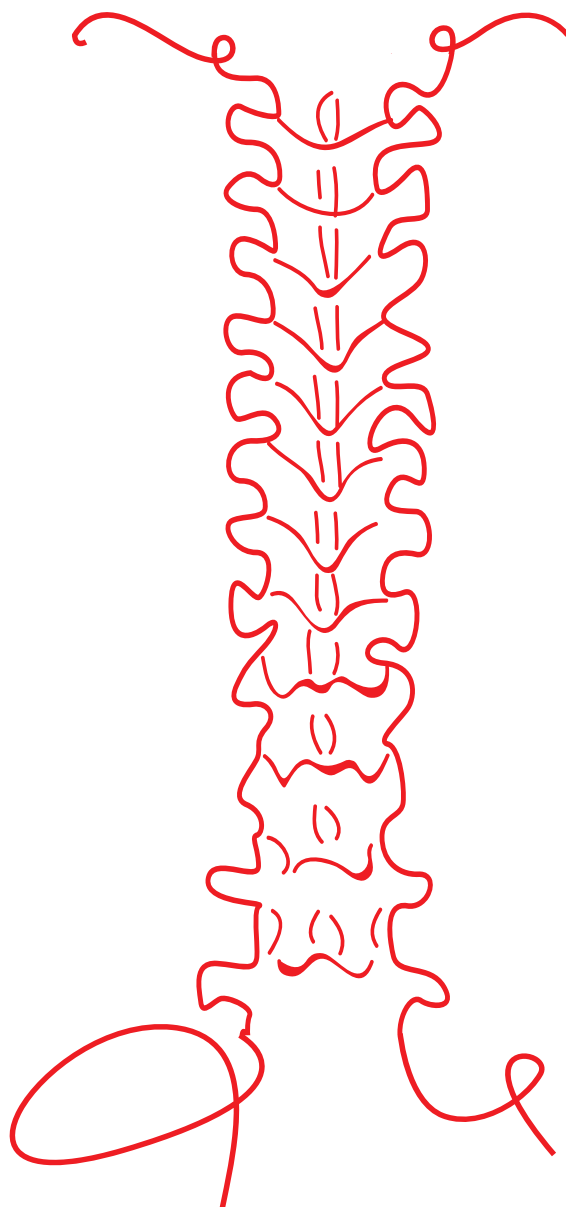

VI HAR DIN RYG

Anatomic SITT A/S

Jylland
Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Sjælland
Broenge 2
2635 Ishøj

T: 86 17 01 74
M: a-sitt@anatomic-sitt.dk
www.anatomicsitt.dk

Mød os på:

