

TRYKSÅRSFOREBYGGENDE PUDER

Jay ClimaZone Contour



Jay GelZone Contour



Jay LowZone+ Contour



Puderne Jay LowZone+ Contour, Jay ClimaZone Contour og Jay GelZone Contour er alle udviklet til at give trykaflastning og stabil postural støtte til kørestolsbrugere med forskellige behov.

Puderne kombinerer nøje udvalgte materialer og er gennemtænkt i design for at sikre optimal vægtfordeling, komfort og beskyttelse af udsatte områder, når man sidder i længere tid.

Puderne fås både til børn og voksne.

Siddepuder til kørestole

Jay ClimaZone Contour


Jay ClimaZone Contour puden er en letvægtspude, som er kontourformet for optimal trykfordeling, samt god pasform.

Puden er fremstillet med nyeste teknologi af polyurethan tråde og en ramme af skum, det gør puden ekstremt let og samtidig trykfordeler og luftfordeler den rigtig godt.

Airmantle-toplaget i puden sørger for at transportere fugt væk og give en god trykreduktion.

CoolOver-betræk er standard på alle Jay ClimaZone puder.

Fås i et bredt udvalg af størrelser, herunder bariatriske modeller. Størrelser tilgængelige fra 25x25 cm til 75x75 cm og **max belastningsvægt er 254 kg.**

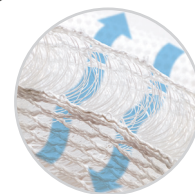

Airmantle

"Vores siddepuder henvender sig til en bred gruppe af kørestolsbrugere med forskellige hudbeskyttelsesbehov og forskellige posturale støttebehov."

Jay GelZone Contour

Jay GelZone Contour er en pude med god trykaflastning. Puden er både konturformet og med en 2 komponent gel, der trykfordeler og absorberer/frigør varme efter behov, hvilket sikrer brugeren optimalt mikroklima og aflastning hele dagen! Gelindsatsen reducerer potentiel shear-risiko samt giver bedre stabilitet end skum.

Jay Gelzone Contour puden giver et højt niveau af trykaflastning, stabilitet omkring bækkenet, temperaturregulering og komfort for brugeren. Geleen er indbygget i puden. Der er et skumlag ovenpå for at sikre at geleen altid forbliver, hvor den skal.

God ergonomisk formgivning hjælper med at fremme en neutral bækkenstilling, forbedrer stabilitet i rygsøjlen og reducerer tilbøjeligheden til en sammensunken kropsholdning.

Patenteret termoregulerende gelcelle-regulerer aktivt brugernes hudtemperatur for at forhindre overdreven svedtendens og sofistikerede betræk fremmer god luftstrøm for yderligere at reducere varme og fugtopbygning.

Størrelser tilgængelige fra 30x30 cm til 60x60 cm.

Max belastningsvægt 158 kg.



Jay LowZone+ Contour

Jay LowZone+ Contour puden er til brugere med behov op til middel hudbeskyttelse og et højt posturalt støttebehov.

Puden er konturformet og lavet i viskoelastisk skum, der lader kroppen synke ned i materialet og yder en god trykfordeling og en høj komfort.

Producenten har udviklet på dette skum over de sidste 55 år og har derfor lavet en basispude, der ikke bare er basis, men trykfordeler bedre end lignende puder i samme kategori.

Størrelser tilgængelige fra 20x20 cm til 75x75 cm.

Max belastningsvægt 158 kg.



Få balance i kroppen

med



Anatomic SITT A/S

Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.dk

FØLG OS PÅ:

