

BESTILLINGSGUIDE

SUPPORT PRO-SERIEN



INDHOLD

Oversigt.....	2	Valg af materiale og størrelse.....	10
Hoftebælter	3	Universalbælte	10
Valg af spænde og trækretning.....	3	Armbind og håndmanchet.....	11
Sittbælt Comfort Pro.....	4	Ankelbespænding og fodstropper.....	12
Sittbælt Pro	5	Support blå	13
Antirotationsbælte.....	6	Sittbælt Comfort blå	13
Valg af størrelse.....	6	Sittbælt blå.....	13
Brystseler.....	7	Antirotationsbælte blå.....	13
Sternumstøtte og sternumvest	7	Sternumstøtte og H-sele.....	14
H-sele og Thoraxsele	8	Ankelbespænding og Armbind	14
Skuldersele	9	Monteringsstilbehør	15
Brystbælte	9	Reservedele.....	16



Vi har fremstillet Support-serien siden begyndelsen af 90'erne, hvilket har givet os stor viden om positioneringsproblematikker. En velpositioneret overkrop er en forudsætning for at vores brugere får bedst mulig hovedkontrol, vejrtrækning, mobilitet og ikke mindst komfort.

Support-serien kan bruges i vores egne eller andre siddesystemer, kørestole, arbejdsstole og hygiejnestole eller hvor end behovet er!

HOFTEBÆLTER

Vi tilbyder forskellige typer af hoftebælter for at imødekomme brugerens behov. Vi har bælter med 2 eller 4 fastgørelsespunkter.



BRYSTSELER

Vi har forskellige typer af brystseler, udformet til at imødekomme forskellige behov men de giver alle en postural kontrol.



ANKELBESPÆNDING

Ankelbespændingen giver en stabil støtte og holder fødderne på fodpladerne. Monteres enkelt på fodpladen.



FODREM/FODSTROP

Det er nemt at positionere fødderne med fodremme, som monteres i fodpladerne. Tilbydes med og uden polstring.



HÅNDMANCHET

Håndmanchetten kan bruges, hvis man har svært ved at holde hænderne på styret/ kørehåndtag.



ARMBIND

Bruges for at positionere armene og forhindre overstræk. Armbindet monteres diagonalt for bedste effekt.



UNIVERSALBÆLTE

Et stærkt elastisk bælte med mange anvendelsesområder.



BRYSTBÆLTE

Brystbæltet giver en fleksibel støtte og stor bevægelsesfrihed for armene.



SUPPORT BLÅ - HYGIEJNE/ BAD & TOILET

En stor del af positionerings-sortimentet tilbydes i blå, så det passer til bad- og toiletstole.



Hoftebæalter

– til positionering af bækkenet

Hoftebæltet kan have en afgørende betydning for sikkerheden og for at brugeren sidder i korrekt position i sin kørestol eller siddesystem. Positioneringen af brugeren er vigtig for rehabilitering og behandling. Et hoftebælte kan have en afgørende betydning for sikkerheden og for at brugeren sidder i korrekt position i sin kørestol eller siddesystem.

Vores bæltesserie bruges til at fastholde bækkenet i rette position, samt modvirke sfremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og sædekuglerne, eller træk i huden.

Vi har tre forskellige hoftebæalter:

Sittbelt Comfort Pro, **Sittbelt Pro** samt **Antirrotationsbælte**.

Valg af tilstramning

Hoftebæltene tilbydes med forskellige spænder og trækninger / stramning.

Vi har to forskellige varianter af tilstramning:

- **ENKELT TRÆK** (en fra midten)
træk til den ene side.
- **DOBBELT TRÆK** (to fra midten)
gør det lettere at justere i forhold til tøj.



Valg af spænde

Hoftebæltene tilbydes med forskellige spænder beroende på belastning, trækninger / stramning for at tilgodese forskellige brugeres behov.

Enkeltræks-spænder strammes på brugerens venstre side, undtagen Chromeline, som strammes på brugerens højre side.

1 211745/211746 Spænde DWSR25/DWSR40 Dobbelt træk	2 211742 Spænde 742 Dobbelt træk	3 211140 Spænde S40 Stærkere end 742, knap på siden
4 211725 Spænde 725 Enkelt træk til 25 mm bånd	5 211740 Spænde 740 Fixlås	6 211101 Spænde Autospænde Kraftigt spænde i metal
7 211106 Spænde Fly Kraftigt spænde i metal	8 211107 Spænde Chromeline Smidigt spænde i metal	9 211340 / 211325 Spænde 340 / 325 Kraftigt spænde i plast
10 371930 Sikkerhedskåbe til spænde Chromeline	11 371931 Sikkerhedskåbe til spænde Autospænde	

SPÆNDE		MATERIALE		STRAMNING		SPÆNDETS BÅNDBREDDER
		Plast	Metal	Enkel	Dobbelt	
1	DWSR25 DWSR40	✓			✓	2,5 cm 4 cm
2	742	✓			✓	4 cm
3	S40	✓		✓		4 cm
4	725	✓		✓		2,5 cm
5	740	✓		✓		4 cm
6	Autospænde		✓	✓		4 cm
7	Flyspænde		✓	✓		4 cm
8	Chromeline		✓	✓		2,5 cm
9	325 340	✓		✓		2,5 cm 4 cm
SIKKERHEDSSLÅS / SIKKERSHEDSKÅBE						
10	Sikkerhedskåbe til spænde Chromeline	✓				
11	Sikkerhedskåbe til spænde autospænde	✓				

Sittbelt Comfort Pro

2-punkthoftebælte



Den enkle og praktiske hoftebælte, der ofte bruges sammen med komfort-kørestole. Sittbelt Comfort Pro har to fastgørelsesstropper og fås i fire forskellige størrelser afhængig af den enkeltes hoftebredde.

Sittbelt Comfort Pro har to bæltepuder, der enten er syet ind i fastgørelsesstropperne, eller som flydende (aftagelige) som så kan justeres efter behov.

Vi tilbyder forskellige spændemuligheder (se side 3) til Sittbelt Comfort Pro, så du kan vælge det, der passer bedst til dine behov.


Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft, som er et blødt skumliggende materiale med stretch, der er behageligt mod huden.

STØRRELSE

Hoftebredde (cm)

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer.


- 15–27 → **S**
27–37 → **M**
35–45 → **L**
45–60 → **XL**

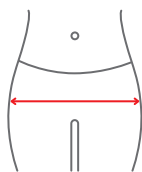

Bæltepudemål (cm)

	A	B	C
S	15.5	8	5
M	20	8.5	6
L	25	8.5	6
XL	30	8.5	6

OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

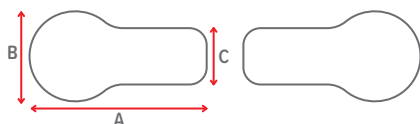

Bredde fastgørelsesstrop (cm)

S	2.5
M	4
L	4
XL	4

Bredde strammestrop (cm)

S	2.5
M	4
L	4
XL	4

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

sort

se side 13

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

E-træk = Enkelt træk D-træk = Dobbelt træk

Varenr.	Hoftebælte 2-punktsbælte fast bæltepude
374116	Sittbelt Comfort Pro Fast str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374117	Sittbelt Comfort Pro Fast str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374118	Sittbelt Comfort Pro Fast str. S, chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374126	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374127	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374128	Sittbelt Comfort Pro Fast str. M, spænde autospænde, E-træk, HB27-37cm (stk)
374136	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374137	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374138	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde autospænde, E-træk, HB35-45cm (stk)
374139	Sittbelt Comfort Pro Fast str. L, spænde fly E-træk, HB35-45cm (stk)
374146	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60 (stk)
374147	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374148	Sittbelt Comfort Pro Fast str. XL, spænde autospænde, E-træk, HB45-60 (stk) *

* Ikke lagervare (længere leveringstid)

E-træk = Enkelt træk D-træk = Dobbelt træk

Varenr.	Hoftebælte 2-punktsbælte flytbar bæltepude
374051	Sittbelt Comfort Pro str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374052	Sittbelt Comfort Pro str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374053	Sittbelt Comfort Pro str. S, chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374040	Sittbelt Comfort Pro str. S, 325-forstærket, E-træk, HB15-27cm (stk) *
374057	Sittbelt Comfort Pro str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374086	Sittbelt Comfort Pro str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374087	Sittbelt Comfort Pro str. M, spænde autospænde, E-træk, HB27-37cm (stk)
374079	Sittbelt Comfort Pro str. M, 340-forstærket, E-træk, HB27-37cm (stk) *
374050	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde 742, D-træk, HB35-45cm (stk)
374054	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374058	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374059	Sittbelt Comfort Pro str. L, spænde fly, E-træk, HB35-45cm (stk)
374083	Sittbelt Comfort Pro str. L, 340-forstærket, E-træk, HB35-45cm (stk) *
374084	Sittbelt Comfort Pro str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374085	Sittbelt Comfort Pro str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374089	Sittbelt Comfort Pro str. XL, spænde fly, E-træk, HB45-60cm (stk)
374098	Sittbelt Comfort Pro str. XL, 340-forstærket, E-træk, HB45-60cm (stk) *

* Ikke lagervare (længere leveringstid)

Sittbelt Pro

4-punkthoftebælte



Et optimalt bælte til formstøbte sæder/siddesystemer og kørestole. Passer til alle typer brugere og giver god positionering og modvirker forskydningseffekten. Sittbelt Pro har fire fastgørelsesstropper med en båndbredde på 25 mm og bælteerne er udstyret med to bæltepuder, der enten kommer syet ind i fastgørelsesstropperne eller som flytbare, som så giver fleksibilitet efter behov.

Vi tilbyder forskellige spændemuligheder (se side 3), så du kan tilpasse dit bælte efter dine specifikke behov og ønsker.


Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft, som er et blødt skumlignende materiale med stretch, der ligger behageligt mod huden.

STØRRELSE

Hoftebredde (cm)

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet, som passer.


- 15–27 → **S**
27–37 → **M**
35–45 → **L**
45–60 → **XL**

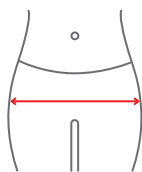

Bæltepudemål (cm)

	A	B	C
S	15,5	8	5
M	20	8,5	6
L	25	8,5	6
XL	30	8,5	6

OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

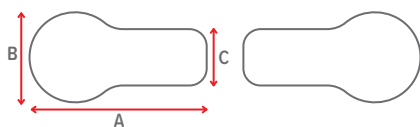

Bredde fastgørelsesstrop (cm)

S	2,5
M	2,5
L	2,5
XL	2,5

Bredde strammestrop (cm)

S	2,5
M	4
L	4
XL	4

MATERIALEVALG



FARVEVALG

sort [se sid. 13](#)

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand- & smuds
Vaskepose anbefales.

E-træk = Enkelt træk D-træk = Dobbelt træk

Varenr.	Sittbelt Pro 4-punktsbælte fast bæltepude
374111	Sittbelt Pro Fast str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374112	Sittbelt Pro Fast str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374113	Sittbelt Pro Fast str. S, chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374121	Sittbelt Pro Fast str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374122	Sittbelt Pro Fast str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374123	Sittbelt Pro Fast str. M, spænde autospænde, E-træk, HB27-37cm (stk)
374131	Sittbelt Pro Fast str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374132	Sittbelt Pro Fast str. L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374133	Sittbelt Pro Fast str. L, spænde autospænde, E-træk, HB35-45cm (stk) *
374134	Sittbelt Pro Fast str. L, spænde fly, E-træk, HB35-45cm (stk)
374141	Sittbelt Pro Fast str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374142	Sittbelt Pro Fast str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374143	Sittbelt Pro Fast str. XL, spænde autospænde, E-træk, HB45-60cm (stk) *

* Ikke lagervare (længere leveringstid)

E-træk = Enkelt træk D-træk = Dobbelt træk

Varenr.	Sittbelt Pro 4-punktsbælte flytbar bæltepude
374046	Sittbelt Pro str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374045	Sittbelt Pro str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374056	Sittbelt Pro str. S, spænde chromeline, E-træk, HB15-27cm (stk)
374047	Sittbelt Pro str. S, Plus, spænde DWSR25, D-træk, HB20-30cm (stk)
374044	Sittbelt Pro str. S, Plus, spænde 725, E-træk, HB20-30cm (stk)
374043	Sittbelt Pro str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374036	Sittbelt Pro str. M, 340-forstærket, E-træk, HB27-37cm (stk) *
374037	Sittbelt Pro str. M, spænde S40, E-træk, HB27-37cm (stk)
374041	Sittbelt Pro str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374042	Sittbelt Pro str. M, spænde autospænde, E-træk, HB27-37cm (stk)
374038	Sittbelt Pro str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB35-45cm (stk)
374030	Sittbelt Pro str. L, spænde 742, D-træk, HB35-45cm (stk)
374031	Sittbelt Pro str. L, spænde 740, E-træk, HB35-45cm (stk)
374033	Sittbelt Pro str. L, spænde fly, E-træk, HB35-45cm (stk)
374034	Sittbelt Pro str. L, spænde autospænde, E-træk, HB35-45cm (stk)
374035	Sittbelt Pro str. L, 340-forstærket, E-træk, HB35-45cm (stk) *
374026	Sittbelt Pro str. XL, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374027	Sittbelt Pro str. XL, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk)
374028	Sittbelt Pro str. XL, spænde fly, E-træk, HB45-60cm (stk) *
374025	Sittbelt Pro str. XL, spænde autospænde, E-træk, HB45-60cm (stk) *
374029	Sittbelt Pro str. XL, 340-forstærket, E-træk, HB45-60cm (stk) *

* Ej lagervare (længere leveranstid)

Antirotationsbælte



Vores Antirotationsbælte bruges ofte i individuelt udformede sæder/siddesystem f for at tilbyde effektiv positionering og modvirke forskydningseffekter og rotation af bækkenet.

Det har fire fastgørelsesstropper og fås i forskellige størrelser afhængigt af hoftebredden.


Tilbydes i materialet Soft, som er et blødt skumlignende materiale med stretch, der er behageligt mod huden. Eller med materialet Gel, som er en kombination af et åndbart Coomax-stof på indersiden, der gør det køligere for den enkelte, og indsyet gel for optimal komfort, plus en behagelig blød yderside.

STØRRELSE

Hoftebredde (cm)

Brugerens hoftebredde afgør, hvilken størrelse af Antirotationsbæltet, som passer.

- 15–25 → XS
- 25–32 → S
- 30–42 → M
- 40–60 → L

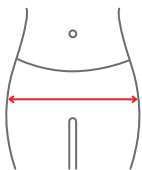

Bæltepudemål (cm)

A × B

- XS 15 × 11
- S 19 × 14
- M 21 × 16.5
- L 23 × 19.5



OBS! Hvert bælte har to bæltepuder


Bredde fastgørelsesstrop

XS–L 2.5 cm

Bredde strammestrop

Berer på valg af spænde

MATERIALEVALG

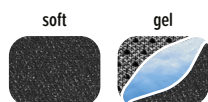

FARVEVALG

sort se sid.13

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

Varenr. Antirotationsbælte 4-punktsbælte fast bæltepude

374060	Antirotationsbælte str. XS, spænde DWSR25, D-træk, HB15-25cm (stk)
374065	Antirotationsbælte str. XS, spænde chromeline, E-træk, HB15-25cm (stk)

374061	Antirotationsbælte str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB 25-32cm (stk)
374062	Antirotationsbælte str. S, spænde DWSR40, D-træk, HB25-32cm (stk)
374066	Antirotationsbælte str. S, spænde chromeline, E-træk, HB25-32cm (stk)
374166	Antirotationsbælte str. S, 325-forstærket, E-træk, HB 25-32cm (stk)

374063	Antirotationsbælte str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB30-42cm (stk)
374078	Antirotationsbælte str. M, spænde 740, E-træk, HB30-42cm (stk)
374067	Antirotationsbælte str. M, spænde autospænde, E-træk, HB30-42cm (stk)
374077	Antirotationsbælte str. M, 340-forstærket, E-træk, HB30-42cm (stk)
374167	Antirotationsbælte str. M, spænde chromeline, E-træk, HB30-42cm (stk)

374064	Antirotationsbælte str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB40-60cm (stk)
374074	Antirotationsbælte str. L, spænde 740, E-træk, HB40-60cm (stk)
374068	Antirotationsbælte str. L, spænde autospænde, E-træk, HB40-60cm (stk)
374069	Antirotationsbælte str. L, spænde fly, E-træk, HB40-60cm (stk)

Varenr. Antirotationsbælte Gel, 4-punktsbælte fast bæltepude

374091	Antirotationsbælte Gel str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB25-32cm (stk)
374094	Antirotationsbælte Gel str. S, spænde DWSR40, D-træk, HB25-32cm (stk)

374092	Antirotationsbælte Gel str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB30-42cm (stk)
374096	Antirotationsbælte Gel str. M, 340-forstærket, E-træk, HB30-42cm (stk)

374093	Antirotationsbælte Gel str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB40-60cm (stk)
--------	---


Valg af størrelse på vore hoftebæltter

Vi har forskellige størrelser på vores hoftebæltter.

Det som adskiller vores bæltter er:

Båndbredde, bæltepudestørrelse og båndlængde.

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet, som passer.

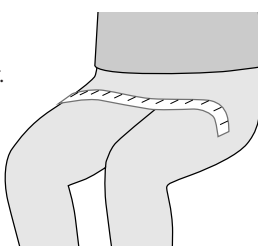

Hofte-bredde	Sittbælt Comfort Pro	Sittbælt Pro	Hofte-bredde	Antirotations-bælte
15–27 cm	S	S	15–25 cm	XS
27–37 cm	M	M	25–32 cm	S
35–45 cm	L	L	30–42 cm	M
45–60 cm	XL	XL	40–60 cm	L

Brystseler

For positionering af overkroppen


God postural kontrol fører til bedre hovedkontrol og øger mulighederne for aktivitet og årvågenhed. Vi har således mulighed for både at rette og vedligeholde placeringen af torsoen ud fra de forhold, vi står over for. Vi tilbyder flere forskellige typer brystseler. Brystselerne fås i fire forskellige

størrelser og passer til børn og voksne. Det, der adskiller de forskellige seler, er fastgørelsesfunktionen, bæltepudens størrelse og bæltepudens former. Vælg en brystsele baseret på fysik og handicap. Brug altid en brystsele sammen med en hoftesele eller lignende støtte til bækkenet.

Sternumstøtte

Vores sternumstøtte er udformet så den giver en koncentreret og behagelig støtte over sternum. Den er specielt udviklet til personer, der har en tendens til at falde fremad med deres overkrop, eller til dem, der oplever begyndende kyfose. Sternumstøtten minimerer disse ubehageligheder og opretholder en sund kropsholdning for den enkelte.


Bæltepudematerialet Soft-Skai er en kombination af materialet soft på indersiden og skindlook på ydersiden.

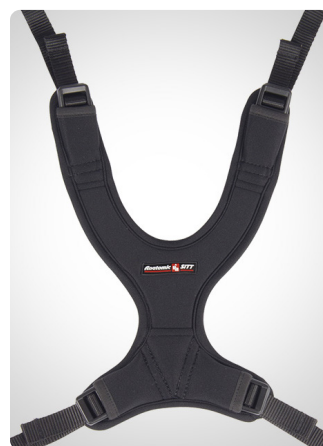

STØRRELSE

Brugerens skulder bredde afgør hvilken størrelse af Sternumstøtten, som passer:

Skulder bredde (cm)

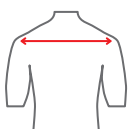


18-24 → XS

22-30 → S

28-40 → M

38-60 → L

Bæltepudemål (cm)

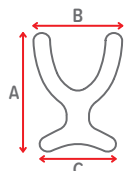

XS 26 × 20 × 18

XSf* 32 × 20 × 18

S 31 × 21 × 18

Sf* 37 × 21 × 18


M 37.5 × 25.5 × 21.5

Mf* 43.5 × 25.5 × 21.5

L 50.5 × 33 × 26

* ved forlænget størrelse bliver A-målet 6 cm længere end alm. størrelse.

MATERIALEVALG

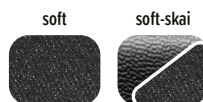

FARVEVALG

sort se sid. 14

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

Varenr.	Sternumstøtte Pro Soft
374001	Sternumstøtte Pro str. XS - Skulderb. 18-24cm (stk)
374156	Sternumstøtte Pro str. XS forlænget - Skulderb. 18-24cm (stk)*
374002	Sternumstøtte Pro str. S - Skulderb. 22-30cm (stk)
374157	Sternumstøtte Pro str. S forlænget - Skulderb. 22-30cm (stk)*
374003	Sternumstøtte Pro str. M - Skulderb. 28-40cm (stk)
374158	Sternumstøtte Pro str. M forlænget - Skulderb. 28-40cm (stk)*
374004	Sternumstøtte Pro str. L - Skulderb. 38-60cm (stk)

Varenr.	Sternumstøtte Soft/Skai
377041	Sternumstøtte Soft/Skai str. XS - Skulderb. 18-24cm (stk)
377036	Sternumstøtte Soft/Skai str. XS forlænget - Skulderb. 18-24cm (stk)*
377042	Sternumstøtte Soft/Skai str. S - Skulderb. 22-30cm (stk)
377037	Sternumstøtte Soft/Skai str. S forlænget - Skulderb. 22-30cm (stk)*
377043	Sternumstøtte Soft/Skai str. M - Skulderb. 28-40cm (stk)
377038	Sternumstøtte Soft/Skai str. M forlænget - Skulderb. 28-40cm (stk)*
377044	Sternumstøtte Soft/Skai str. L - Skulderb. 38-60cm (stk)

H-sele

Vores H-sele giver brugeren ekstra støtte ved rotation og er særligt velegnet til dem, som har behov for hjælp til at holde overkroppen oprejst og/eller skulderne tilbage. Passer også godt til borgere, som bruger sonde.


For de bedste resultater anbefaler vi, at brugeren kombinerer vores brystseler med et af vores hoftebælter for en helhedsløsning, som forbedrer stabilitet og komfort for brugeren.

Trækretningen for de øverste fastgørelsespunkter skal være lidt over skulderområdet for at forhindre, at skulderen bliver skubbet ned. Forhøjningsstænger kan tilkøbes som tilbehør.

STØRRELSE


Brugerens skulderbredde afgør hvilken størrelse af H-selen, som passer.

Skulderbredde (cm)

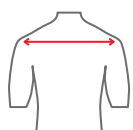


18–24 → **XS**
22–30 → **S**
28–40 → **M**
38–60 → **L**

Bæltepudemål (cm)

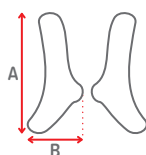

A × B
XS 23.5 × 8
S 32 × 11
M 39 × 14
L 46 × 16.5

MATERIALEVALG

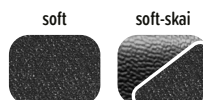

FARVEVALG

sort [se sid. 14](#)

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	H-sele Soft/Skai
377046	H-sele Soft/Skai str. XS - Skulderb. 18-24cm (stk)
377047	H-sele Soft/Skai str. S - Skulderb. 22-30cm (stk)
377048	H-sele Soft/Skai str. M - Skulderb. 28-40cm (stk)
377049	H-sele Soft/Skai str. L - Skulderb. 38-60cm (stk)

Varenr.	H-sele Pro
374015	H-sele Pro str. XS - Skulderb. 18-24cm (stk)
374016	H-sele Pro str. S - Skulderb. 22-30cm (stk)
374017	H-sele Pro str. M - Skulderb. 28-40cm (stk)
374018	H-sele Pro str. L - Skulderb. 38-60cm (stk)

Thorax-sele


Vores Thorax-sele er udviklet specifikt til personer med lav muskeltonus.

Selen giver en god løsning til løft, der starter ved lænderyggen, og tilbyder en præcis positionering for at opnå optimal komfort og stabilitet for brugeren.

Brugeren får den ekstra støtte, der er nødvendig for at opretholde korrekt positionering og reducere belastninger.

STØRRELSE

Brugerens kropsbredde afgør hvilken størrelse af Thorax-selen, som passer.

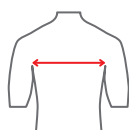

Kropsbreddemål (cm)

XXS 16–20
XS 20–25
S 25–30
S+ 27–32
M 30–35
M+ 32–38
L 35–40

MATERIALEVALG



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Thorax-sele Pro
374150	Thoraxsele Pro str. XXS, kropsb. 16-20cm (stk)
374151	Thoraxsele Pro str. XS, kropsb. 20-25cm (stk)
374152	Thoraxsele Pro str. S, kropsb. 25-30cm (stk)
374262	Thoraxsele Pro str. S+, kropsb. 27-32cm (stk)
374153	Thoraxsele Pro str. M, kropsb. 30-35cm (stk)
374263	Thoraxsele Pro str. M+, kropsb. 32-38cm (stk)
374154	Thoraxsele Pro str. L, kropsb. 35-45cm (stk)


Brystbælte Anatomic

Brystbæltet er designet til at tilbyde brugeren justerbar og behagelig støtte, samtidig med at risikoen for gnidninger under armhulerne reduceres. Den er konstrueret med en bred polstring over brystet for øget komfort og stabilitet. Derudover er bæltet udstyret med praktiske side-træk spænder, der gør det nemt at justere og som sikrer, at bæltet bliver på sin plads. Med vores brystbælte kan du forvente både komfort og funktionalitet under dine aktiviteter.

STØRRELSE

Vælg størrelse ud fra **brystkasseomfang** (mål hen over brystkassen til rygplade/rygrør) og ønskede bredde på polstringen. **Justerbar** ca. 10 cm.

Kropsomfang ca (cm)	Bæltedudsmål H×B (cm)
XS 35–44	XS 8×34
S 45–55	S 9×39
M 56–65	M 10×46
L 66–75	L 12×53
XL 76–85	XL 13×65

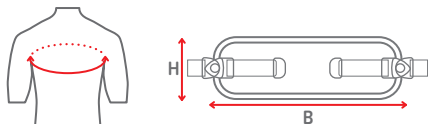

Båndbredde (cm)

S 2,5	L 4
M 4	XL 4

MATERIALEVALG



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.




Varenr.	Brystbælte
377000	Brystbælte Anatomic str. XS - bæltedude 8x34cm (stk)
377001	Brystbælte Anatomic str. S - bæltedude 9x39cm (stk)
377002	Brystbælte Anatomic str. M - bæltedude 10x46cm (stk)
377003	Brystbælte Anatomic str. L - bæltedude 12x53cm (stk)
377004	Brystbælte Anatomic str. XL - bæltedude 13x61cm (stk)

Brystbælte Basic & Brystbælte Zitzi

Brystbælte Basic har en enkel og hurtig åbne-/lukkefunktion med overlappende velcrolukning. Bæltet har en blød og behagelig bæltedude i fire forskellige størrelser og fastgøres med to 4 cm brede fastgørelsesbånd. Bæltet kan med fordel kombineres med en anden brystsele og et hoftele.

Brystbælte Zitzi har en sikker åbne-/lukkefunktion med Uniloop-lukning og velcrobånd.


De 2,5 cm brede bånd skal fastgøres fra siderne. Bæltet kan kombineres med en anden brystsele og en hoftele.

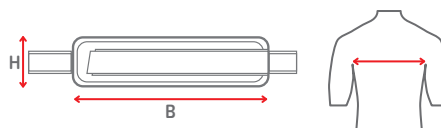

Bæltedudsmål H × B Båndbredde Kropsbredde

Varenr. 377415	8×15cm	4cm	15–19cm
Varenr. 377420	8×20cm	4cm	20–24cm
Varenr. 377425	8×25cm	4cm	25–29cm
Varenr. 377430	8×30cm	4cm	30–34cm

Varenr.	Brystbælte Basic
377415	Brystbælte Basic 8x15cm (stk)
377420	Brystbælte Basic 8x20cm (stk)
377425	Brystbælte Basic 8x25cm (stk)
377430	Brystbælte Basic 8x30cm (stk)

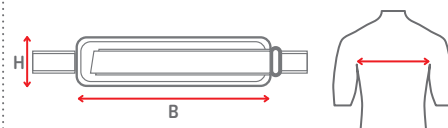

Bæltedudsmål H × B Båndbredde Kropsbredde

str. 1	5×17cm	2.5cm	17–19cm
str. 2	5×20cm	2.5cm	20–22cm
str. 3	5×23cm	2.5cm	23–25cm
str. 4/5	8×26cm	2.5cm	26–28cm

Varenr.	Brystbælte Zitzi
372011	Brystbælte str. 1, 5x17cm - Zitzi (stk)
372012	Brystbælte str. 2, 5x20cm - Zitzi (stk)
372013	Brystbælte str. 3, 5x23cm - Zitzi (stk)
372014	Brystbælte str. 4/5, 8x26cm - Zitzi (stk)

MATERIALEVALG



FARVEVALG


sort

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

Valg af størrelse på vores **brystseler**

For at vælge rette størrelse til respektive brugere måler du fra skulder til skulder. Disse mål er taget efter den almene bruger.

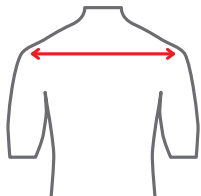


18–24cm	→	XS
22–30cm	→	S
28–40cm	→	M
38–60cm	→	L

Materiale


Alle vores produkter med Pro eller Soft i produktnavnet materialet Soft. Alle produkter med Soft-Skai i produktnavnet har materialet Soft-Skai.



Soft er i et blødt skum-lignende materiale med stretch, som er behageligt for huden.

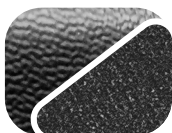

Soft-Skai er en kombination med **Soft** på indersiden og **Skai** på ydersiden (skind-look) som er let at tørre af.

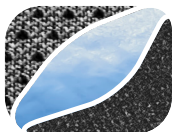

Gel er kombinationen af et ventilerende Coolmax stof på indersiden, der gør det køligere, indsyet gel for optimal komfort, plus en behagelig blød yderside.

Vask

Alle vores seler og bælter kan vaskes ved 60°C.

Materialet er vand- og smudsafvisende.

Anbefales at vaske i vaskepose.




Mere support For bedre positionering



Universalbælte

Et stærkt elastisk bælte med mange anvendelsesmuligheder. Brug det som støtte omkring hoften, lårene eller benene, til brystet eller over maven. Designet gør, at det nemt kan forkortes efter behov.

Vores universalbælte spændes trinføst ved hjælp af en velcrolukning, hvor velcroen består af små fine pigge, der gør, at materialet ikke klæber så nemt til brugerens tøj og er nemt at holde rent. Velcrolukningen er ekstrem stærk i trækretningen og udstyret med en træklokke for lettere åbning.

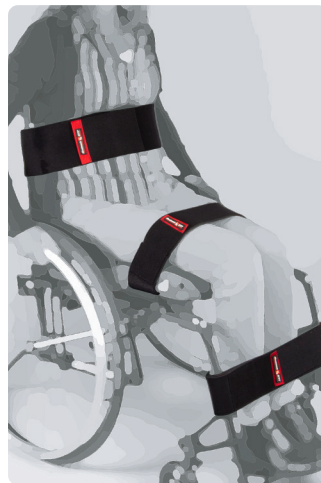

STØRRELSE

Universalbæltet tilbydes i

to forskellige længder: **145 & 225cm**

og tre forskellige bredder: **9, 12, 15cm.**

Vælg efter behov og ønskemål.

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

Varenr.	Anatomic Universalbælte
372050	Anatomic Universalbælte H9xB145cm (stk)
372051	Anatomic Universalbælte H9xB225cm (stk)
372052	Anatomic Universalbælte H12xB145cm (stk)
372053	Anatomic Universalbælte H12xB225cm (stk)
372054	Anatomic Universalbælte H15xB145cm (stk)
372055	Anatomic Universalbælte H15xB225cm (stk)

Armbind

Vores armbind er designet med brugerens sikkerhed og komfort i tankerne. Ved at montere armbindet diagonalt, kan du forhindre overstrækning og sikre, at brugerens arme forbliver inden for rækkevidde inden for deres kørestol eller siddesystem.

Takket være elastikken i fastgørelsesbåndet reduceres risikoen for skader på både bruger og produkt. Med vores armbind kan du sikkert og effektivt sikre den korrekte placering og komfort for personer i kørestol eller siddesystemer.

Sælges i sæt.

STØRRELSE

Armbindet tilbydes i tre størrelser, som vælges ud fra omkredsen på håndleddet:
S = 13 cm, M = 17 cm, L = 21 cm.

Omkreds håndled (cm)

S 13 – 17

M 17 – 21

L 21 – →

Båndbredde: 2.5 cm

MATERIALEVALG

soft-skai



FARVEVALG

sort [se sid. 14](#)

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Armbind
378101	Armbind m. bæltepude str. S - 13 cm (sæt)
378201	Armbind m. bæltepude str. M - 17 cm (sæt)
378301	Armbind m. bæltepude str. L - 21 cm (sæt)

Håndmanchet

Håndmanchetten er den praktiske løsning for dem, der har svært ved at holde hånden/hænderne på håndtaget eller kørehåndtagene. Håndmanchetten er meget nem at påføre.

Du tager blot håndmanchetten på, når du allerede holder på styret, ligesom billedet til højre viser. Med denne løsning kan du sikre dig et fast greb og bevare kontrollen uden besvær. Vores håndmanchet gør det muligt for den enkelte at nyde en behagelig og bekymringsfri oplevelse under deres aktiviteter.

Sælges enkeltvis.

STØRRELSE

Håndmanchetten tilbydes i tre størrelser, som passer både højre og venstre hånd.

Håndlængde (cm)

S – 10

M 10 – 15

L 16 – 22



MATERIALEVALG

soft-skai



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Håndmanchet
3775	Håndmanchet Eksklusiv str. S (stk) *
3776	Håndmanchet Eksklusiv str. M (stk) *
3777	Håndmanchet Eksklusiv str. L (stk) *

* Ikke lagervare (længere leveringstid)

Ankelbespænding

Vores ankelbespænding med 3-punktsbespænding giver en stabil pasform rundt om anklen, hvilket er afgørende for at støtte og beskytte anklen.

Vi tilbyder to muligheder for låsning: Velcro eller spænde. Dette giver brugerne fleksibiliteten til at justere ankelbespændingen efter deres præferencer og komfortbehov.

Sælges i sæt.

STØRRELSE

Mål rundt om ankel (cm)

XS 14–18

S 16–24

M 22–28

L 26–32

XL 32– →

Form på bæltepude



Bredde på fastgørelsesrem

1.5 cm (**XS/S**), 2 cm (**M/L/XL**).

Sælges i sæt.

MATERIALEVALG

soft-skai



FARVEVALG

sort

se sid. 14

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr. Ankelbespænding m. velcro & faste fastgørelsesbånd

377066 Ankelbespænding basic str. XS, velcro, 16cm (sæt)

377067 Ankelbespænding basic str. S, velcro, 21cm (sæt)

377068 Ankelbespænding basic str. M, velcro, 26cm (sæt)

377069 Ankelbespænding basic str. L, velcro, 31cm (sæt)

377070 Ankelbespænding basic str. XL, velcro 36cm (sæt)

Varenr. Ankelbespænding m. spænde & faste fastgørelsesbånd

377086 Ankelbespænding basic str. XS, spænde, 16cm (sæt)

377087 Ankelbespænding basic str. S, spænde, 21cm (sæt)

377088 Ankelbespænding basic str. M, spænde, 26cm (sæt)

377089 Ankelbespænding basic str. L, spænde, 31 cm (sæt)

377090 Ankelbespænding basic str. XL, spænde, 36cm (sæt)

Fodstroppe/fodremme

Vores fodstroppe/fodremme fås i to forskellige udgaver: med eller uden polstring, så du kan vælge den, der passer bedst til den enkelte. For at sikre smidig brug og individuel tilpasning tilbyder vi to forskellige lukkemuligheder til vores fodstroppe. Du kan vælge mellem velcro eller spænde, begge designet til at sikre dine fødder komfort.

Sælges i sæt.

STØRRELSE


Vælg model og størrelser efter dine behov:

Båndlængderne er 45, 60 eller 70 cm.

Bæltepudemål (cm)

A × B × C

16.5 × 6.5 × 4.5

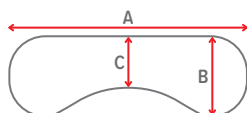

MATERIALEVALG

soft-skai



FARVEVALG

sort

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr. Fodstrop med bæltepude og velcro (sæt) Båndbredde

374023 Fodstrop m bæltepude og velcro - bånd 45 cm 2 cm

374024 Fodstrop m bæltepude og velcro - bånd 60cm 2 cm

374317 Fodstrop m bæltepude og velcro - bånd 70cm 2 cm

Varenr. Fodstrop med bæltepude og spænde (sæt) Båndbredde

374325 Fodstrop m bæltepude & spænde - bånd 45cm 2 cm

374326 Fodstrop m bæltepude & spænde - bånd 60cm 2 cm

374327 Fodstrop m bæltepude & spænde - bånd 70cm 2 cm

Support Blå

passer vores bad- og toiletstole

Sittbelt Comfort Blå 2-punkt


Har to fastgørelsesbånd og fås i forskellige størrelser alt efter hoftebredde. Forskellige stropper kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der er flytbare. Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer: se vores størrelsesguide på side 6.

Bæltepudemål (cm)

	A	x	B	x	C
S	15,5	x	8	x	5
M	20	x	8,5	x	6
L	25	x	8,5	x	6

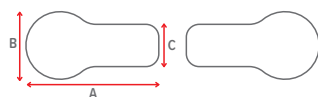

OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid. 4

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Sittbelt Blå 2-punkt flytbar bæltepude
374201	Sittbelt Blå Comfort str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374202	Sittbelt Blå Comfort str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374211	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374212	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde S40, E-træk, 27-37cm (stk)
374213	Sittbelt Blå Comfort str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374221	Sittbelt Blå Comfort str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB45-60cm (stk)
374222	Sittbelt Blå Comfort str. L, spænde S40, E-træk, HB45-60cm (stk) *
374223	Sittbelt Blå Comfort str. L, spænde 740, E-træk, HB45-60cm (stk) *

* Ikke lagervare (længere leveringstid)

Sittbelt Blå 4-punkt


Har fire fastgørelsesbånd og fås i forskellige størrelser afhængig af hoftebredde. Forskellige stropper kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der er flytbare. Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer: se vores størrelsesguide på side 6.

Bæltepudemål (cm)

	A	x	B	x	C
S	15,5	x	8	x	5
M	20	x	8,5	x	6
L	25	x	8,5	x	6

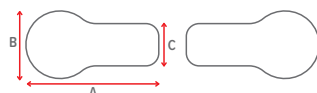

OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid. 5

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Sittbelt Blå 4-punkt flytbar bæltepude
374205	Sittbelt Blå str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB15-27cm (stk)
374206	Sittbelt Blå str. S, spænde 725, E-træk, HB15-27cm (stk)
374216	Sittbelt Blå str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB27-37cm (stk)
374217	Sittbelt Blå str. M, spænde S40, E-træk, 27-37cm (stk)
374218	Sittbelt Blå str. M, spænde 740, E-træk, HB27-37cm (stk)
374226	Sittbelt Blå str. L, spænde DWSR40, D-træk, HB37-60cm (stk)
374227	Sittbelt Blå str. L, spænde S40, E-træk, HB37-60cm (stk) *
374228	Sittbelt Blå str. L, spænde 740, E-træk, HB37-60cm (stk)

* Ikke lagervare (længere leveringstid)

Antirotationsbælte Blå

Har fire fastgørelsesbånd og fås i forskellige størrelser afhængig af hoftebredde. Forskellige stropper kan vælges efter behov og ønsker. Bælterne har to bæltepuder, der er fastmonteret. Bæltepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens hoftebredde afgør hvilken størrelse af hoftebæltet som passer: Se vores størrelsesguide på side 6.

Bæltepudemål (cm)

	A	x	B
S	19	x	14
M	21	x	16,5



OBS! Hvert bælte har to bæltepuder

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid. 6

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Antirotationsbælte Blå fast bæltepude
374231	Antirotationsbælte Blå str. S, spænde DWSR25, D-træk, HB25-32cm (stk)
374233	Antirotationsbælte Blå str. S, spænde DWSR40, D-træk, HB25-32cm (stk)
374241	Antirotationsbælte Blå str. M, spænde DWSR40, D-træk, HB30-42cm (stk)
374242	Antirotationsbælte Blå str. M, spænde 740, E-træk, HB30-42cm (stk) *

* Ikke lagervare (længere leveringstid)


Sternumstøtte Soft Blå

Sternumstøtte Soft Blå tilbydes i 3 forskellige størrelser og har fire fastgørelsesbånd. Bæltedepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens skulderbredde afgør hvilken størrelse af Sternumstøtte som passer: **se vores størrelsesguide på side 10.**

	A	x	B	x	C
S	31	x	21	x	18 cm
M	37.5	x	25.5	x	21.5 cm
L	50.5	x	33	x	26 cm

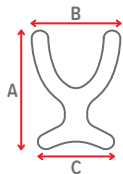

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid.7

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Sternumstøtte Soft Blå
375211	Sternumstøtte Soft Blå str. S - Skulderb. 22-30cm (stk)
375311	Sternumstøtte Soft Blå str. M - Skulderb. 28-40cm (stk)
375411	Sternumstøtte Soft Blå str. L - Skulderb. 38-60cm (stk)

H-sele Soft Blå


H-sele Soft Blå tilbydes i 3 forskellige størrelser og har fire fastgørelsesbånd.

Bæltedepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.

STØRRELSE

Brugerens skulderbredde afgør hvilken størrelse af H-selen som passer: **se vores størrelsesguide på side 10.**

	A	x	B
S	32	x	11 cm
M	39	x	14 cm
L	46	x	16 cm

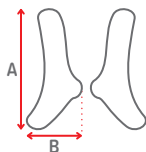

MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid.8

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	H-sele Soft Blå
376521	H-sele Soft Blå str. S - Skulderb. 22-30cm (stk)
376531	H-sele Soft Blå str. M - Skulderb. 28-40cm (stk)
376541	H-sele Soft Blå str. L - Skulderb. 38-60cm (stk)

Ankelbespænding Blå

Har tre fastsyede fæstebånd. Ankelbespændingen har velcrolukning. Bredde på fastgørelsesbånd 1.5 cm (str. XS, S) og 2 cm (på størrelserne M, L, XL). Bæltedepuderne er syet i det behagelige materiale Soft. Sælges i sæt.

STØRRELSE

Basic bæltedepude

Mål rundt om anklen, cm

XS	14 - 18
S	16 - 24
M	22 - 28
L	26 - 32
XL	32 - ->



MATERIALEVALG

soft



FARVEVALG

blå

se sid.12

VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.



Varenr.	Ankelbespænding Basic Blå
377131	Ankelbespænding basic blå 3-punkt, velcro str. XS - 16cm (sæt)
377132	Ankelbespænding basic blå 3-punkt, velcro str. S - 21cm (sæt)
377133	Ankelbespænding basic blå 3-punkt, velcro str. M - 26cm (sæt)
377134	Ankelbespænding basic blå 3-punkt, velcro str. L - 31cm (sæt)
377135	Ankelbespænding basic blå 3-punkt, velcro str. XL - 36cm (sæt)

Armbind

Armbindene har et langt fastgørelsesbånd og har velcrolukning rundt om håndledet. Bæltedepuderne er syet i det behagelige materiale Soft.



STØRRELSE

Omkreds håndled (cm)

S	13 - 21
L	21 - ->

FARVEVALG

blå

se sid.11

MATERIAL

soft



VASK

Kan vaskes ved 60°C.
Afviser vand og snavs
Vaskepose anbefales.

Varenr.	Armbind
378211	Armbind Soft Blå str. S - Support
378111	Armbind Soft Blå str. L - Support

Monterings- tilbehør

Monteringsalternativ

Vi har udviklet flere forskellige monteringssæt til fastgørelse på rør mm. se nedenfor:

To rustfrie skruesæt:

Varenr. 990090

Passer til Sternumstøtte, Sternumstøttevest, H-sele, Armbind og Thoraxsele.

Varenr. 990091

Passer til Ankelbespænding.



Varenr. 990090 Skruerpose
Stjerneskrue M5x25 RF (2 stk.)
Islagsmøtrikker M5 RF (2 stk.)



Varenr. 990091 Skruerpose
Stjerneskrue M5x25 RF (6 stk.)
Spændeskive 5x16x1 RF (6 stk.)
Låsemøtrik M5 RF (6 stk.)

Till bæltten:



Varenr. 371910
Universalfæste Support



Varenr. 371911
Universalfæste Support



Varenr. 371912
Universalfæste Support



Varenr. 371913
Universalfæste Support



Varenr. 386
Universalfæste Support



Varenr. 387
Universalfæste Support

– hoftebælter 25 mm, **M6** (4 stk.): – hoftebælter 25 mm, **M8** (4 stk.): – hoftebælter 25 mm, **M6** (2 stk.): – hoftebælter 25 mm, **M8** (2 stk.): – hoftebælter 40 mm, **M8** (2 stk.): – hoftebælter 40 mm, **M6** (2 stk.)



Varenr. 371916
Universalfæste Support – 25 mm (2 stk.)
(medfølgende beslag passer 19, 22 & 25 mm rør)



Varenr. 371917
Universalfæste Support – hoftebælter 25 mm (4 stk.)
(medfølgende beslag passer 19, 22 og 25 mm rør)



Varenr. 371918
Universalfæste Support – hoftebælter 40 mm (2 stk.)
(medfølgende beslag passer 19, 22 og 25 mm rør)

Til seler:



Varenr. 3715
Forhøjningsstang
til 25 mm bånd,
fast ryg



Varenr. 3716
Forhøjningsstang
til 40 mm bånd,
fast ryg



Varenr. 371903
Fæste - forhøjningsstang,
justerbar (indgår i **371901**)



Varenr. 371908
Forhøjningsstang
justerbar, til 25 mm
bånd, 60 mm stropper



Varenr. 371907
Forhøjningsstang justerbar,
til 25 mm bånd,
klemmefæste



Varenr. 152238
Øvre beslag sele
(Universal 16x16 passer alle
Zitzi nakkestøtter)



790301
FMK str. 1

790302
FMK str. 2

790303
FMK str. 3



Varenr. 385234
Øvre beslag beslag sele
(Universal 16x16 passer alle
Zitzi nakkestøtter)

FMK® - Fæste mellem kørehåndtag

FMK (fæste mellem kørehåndtag) er et universal monteringskit til at gøre montering af positioneringssele og hovedstøtte lettere. Monteres omkring kørestolens skubbehåndtag/kørehåndtag eller rygrør. Bruges også til at få den rigtige trækretning til positioneringsstøtten.

FMK tilbydes i 3 forskellige størrelser:
Størrelse 1 tager et spænd på 22–42 cm.
Størrelse 2 tager et spænd på 32–52 cm.
Størrelse 3 tager et spænd på 42–62 cm.
Passer til rørtykkelsen 20, 22 og 25 mm.

Forhøjningsstænger anvendes sammen med FMK. Findes både til 25 mm og 40 mm bånd. Fæste til hovedstøtten indgår som standard. FMK er aftagelig uden værktøj.

Reserve dele

Varenr.	Reserve dele bæltepuder til hoftebælter
376214	Bæltepude til Sittbelt Pro str. S (25mm)
376215	Bæltepude til Sittbelt Pro str. M (25mm)
376216	Bæltepude til Sittbelt Pro str. L (40mm)
376217	Bæltepude til Sittbelt Pro forstærket (40mm)
379511	Bæltepude Sittbelt Soft Blå str. S
379611	Bæltepude Sittbelt Soft Blå str. L

Varenr.	Reserve dele Universalbælte
372066	Velcro 8x15 cm (inkl. rødt bånd og logo)
372067	Velcro 11x15 cm (inkl. rødt bånd og logo)

Varenr.	Reserve dele spænder
211101	Autospænde, spænde
211106	Flyspænde
211107	Chromeline, spænde
211140	Spænde S40
211325	Spænde 325
211340	Spænde 340
211725	Spænde 725
211740	Spænde 740
211742	Spænde 742
211745	Spænde DWSR25
211746	Spænde DWSR40
211000	Uniloop 25, spænde
211001	Uniloop 40, spænde
211005	D-ring 25, spænde (ESV25)
211015	Triglidle spænde 15 mm
211020	Triglidle spænde 20 mm
211025	Triglidle spænde 25 mm
211040	Triglidle spænde 40 mm
211104	ESR 20, spænde
211105	ESR 25, spænde
211315	Spænde 315
211320	Spænde 320
211720	Spænde 720

Spørgsmål & svar

Hvad er fordelene med et hoftebælte på kørestolen?

Fordelen ved hoftebelten er, at den placerer bækkenet i den korrekte position, modvirker forskydning og dermed unødigt højt tryk på haleben og sædekugler.

Hvad er forskellen på Sittbelt Comfort Pro og Sittbelt Pro?

Sittbelt Comfort Pro er et enkelt hoftebælte med et fastgørelsesbånd på hver side. (trykbelte).

Sittbelt Pro er et positionerende hoftebælte og har 2 fastgørelsesbånd på hver side, hvilket giver bedre positionering og har bedre justeringsmuligheder med forreste/bagerste bånd, hvilket gør det lettere at placere bæltet.

Hvornår bruges Antirotationsbæltet?

Giver meget god positionering og modvirker forskydning samt rotation af bækkenet. Altid fast bæltepude. Findes også med gel-bæltepude. Findes med både enkelt træk og dobbelt træk samt flere valg af spænder.

Dobbelt træk / enkelt træk?

Dobbelt træk foretrækkes generelt. Det fordeler trykket mere jævnt og gør det lettere for personale eller assistent at spænde bæltet, da man kan stramme det ordentligt fra begge sider.

Hvis brugeren selv skal kunne spænde bæltet, kan enkelt træk være en fordel. Uanset hvilken løsning man vælger, er det vigtigt, at bæltet altid spændes ordentligt og stramt for at udnytte bæltets funktion fuldt ud.

Hoftebælte med fast eller flytbar bæltepude?

Flytbar bæltepude er mere fleksibel og nem at justere efter montering. Faste bæltepuder drejer sig ikke, men er mere følsomme ved montering, da bæltepuderne ikke kan justeres (f.eks. ved vask).

Hvilket spænde skal man vælge?

Hoftebælterne tilbydes med forskellige spænder, i plast eller metal, med enkelt træk eller dobbelt træk. Man tager udgangspunkt i brugerens behov og bæltets ønskede funktion.

Hvornår vælger man Sternumstøtte vs. H-sele?

Sternumstøtte giver en god støtte til overkroppen med en koncentreret støtte over sternum, til personer der falder fremad med overkroppen. Egner sig også godt til piger/kvinder med hensyn til barmen.

H-sele giver generelt en bedre opretning end sternumstøtten og kan modvirke rotation. Velegnet ved brug af knap/PEG, da den er åben foran sammenlignet med sternumstøtten.