


# TRYKSÅRSFOREBYGGENDE PUDER

AirZone Contour



LowZone Gel2 Contour

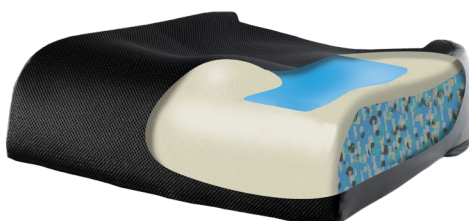

LowZone+ Contour





Det er med stor glæde, at vi nu kan tilbyde et udvalg af tryksårsforebyggende puder.

Puderne kan imødekomme forskellige tryksårskategorier og fås både til børn og voksne. Puderne er stabile og komfortable, og så er de fremstillet med den nyeste teknologi.

## TRYKSÅRSFOREBYGGENDE PUDER

### Siddepuder til kørestole



#### iQ kompatibel (intelligent pude)

I de puder, som er kompatibel med vores iQ teknologi kan du få tilføjet en integreret tryksensor.

Sensoren er placeret inden i puden og aktiveres, når en bruger sidder på sin pude. Den vil give brugeren regelmæssige beskeder i form af et bip, hvis de ikke har bevæget sig.

Vi har alle brug for disse instruktioner for at sikre, at vi bevæger os regelmæssigt. For folk, der bruger vores trykpuder, varierer deres mulighed for bevægelse meget, så det kan være, at brugeren læner sig fra den ene side til den anden, hvor en anden har mulighed for langt mere bevægelse.

#### AirZone Contour

**AirZone Contour puden** er en højrisiko pude, der trykaflaster op til tryksårskategori high. Den er kontourformet for optimal trykfordeling, samt god pasform.

Puden er fremstillet med nyeste teknologi af polyurethan tråde og en ramme af skum, det gør puden ekstremt let og samtidig trykfordeler og luftfordeler den rigtig godt.

Airmantle-toplaget i Airzonen sørger for at transportere fugt væk og give en enestående trykreduktion.

AirZone contour puden er kompatibel med vores iQ teknologi.

CoolOver-betræk er standard på alle Airzone -puder.

Størrelser tilgængelige fra 25x25 cm til 75x75 cm og **max belastningsvægt er 254 kg.**



**LowZone Gel2 Contour puden** er en pude, der trykaflaster op til tryksårskategori high. Pudens er både konturformet og med en 2 komponent gel, der trykfordeler og absorberer/ frigør varme efter behov, hvilket sikrer brugeren optimalt mikroklima og aflastning hele dagen!

LowZone Gel2 contour giver et meget højt niveau af trykaflastning, stabilitet omkring bækkenet, temperatur-regulering og komfort for brugeren. Geleen er indbygget i pudens. Der er et skumlag ovenpå for at sikre at geleen altid forbliver, hvor den skal.

LowZone Gel2 er kompatibel med vores iQ teknologi.

God ergonomisk formgivning hjælper med at fremme en neutral bækkenstilling, forbedrer stabilitet i rygsøjlen og reducerer tilbøjeligheden til at indtage en sammensunken kropsholdning.


Gelindsatsen reducerer potentiel shear-risiko samt giver bedre stabilitet end skum.

Patenteret termoregulerende gelcelle-regulerer aktivt brugernes hudtemperatur for at forhindre overdreven svedtendens og sofistikerede betræk fremmer god luftstrøm for yderligere at reducere varme og fugtopbygning.

Størrelser tilgængelige fra 30x30 cm til 60x60 cm.

Max belastningsvægt 158 kg.

### LowZone Gel2 Contour

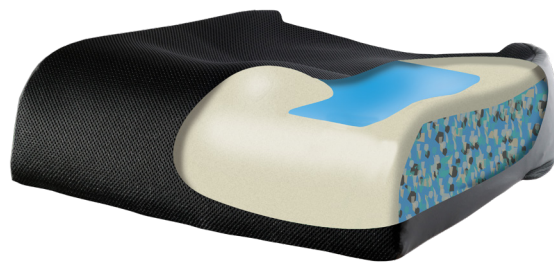

**LowZone+ Contour puden** er en pude, der trykaflaster op til tryksårskategori medium. Pudens er konturformet og lavet i viskoelastisk skum, der lader kroppen synke ned i materialet og yder en god trykfordeling og en høj komfort.

Skum er ikke bare skum og producenten har udviklet på det over de sidste 55 år og har derfor lavet en basispude, der ikke bare er basis, men trykfordeler bedre end lignende puder i samme kategori.

Størrelser tilgængelige fra 20x20 cm til 75x75 cm.

Max belastningsvægt 158 kg.

### LowZone+ Contour



*”Vores siddepuder henvender sig til en bred gruppe af kørestolsbrugere med lav, mellem eller høj risiko for at udvikle tryksår.”*

*Få balance i kroppen*

med



**Anatomic SITT A/S**

Marøgelhøj 22B  
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74

Mail [a-sitt@anatomic-sitt.dk](mailto:a-sitt@anatomic-sitt.dk)

Web [www.anatomicsitt.dk](http://www.anatomicsitt.dk)

**FØLG OS PÅ:**

